


PFLEGE MATRATZE *Rhombio-Care*[®] Therm Plus

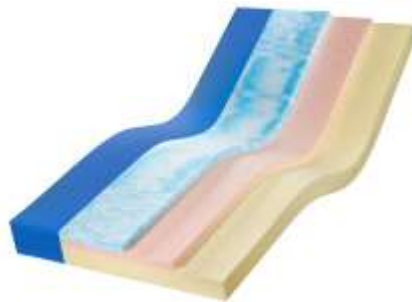

Matratzenkonstruktion:

Material:

100% PU-Schaumstoff hergestellt im Kaltschaumverfahren,
3 cm Rhombio-therm[®] soft mit Rahmenstanzung,
Spezialschaum Skytherm.

Oberseite (blau):

Mittelschicht (rosa):

3 cm 7-Zonen-Kaltschaumkern mit Rhombio-Flex Belüftung und
verstärkter Randzone, RG 55 - mittelfest
Raumgewicht 55 kg/m³, Stauchhärte 4,0 kPa

Unterseite (gelb):

8 cm 7-Zonen-Kaltschaumkern mit Rhombio-Flex Belüftung und
verstärkter Randzone, RG 55 – fest

Format:

90 x 200 x 14 cm, 100 x 200 x 14 cm

Bezüge:

wählen Sie aus verschiedensten Bezugsmöglichkeiten:
z.B.: Fein-Jerseybezug, Klintex-Hygienebezug,
Hygienebezug Semy Plus

Eigenschaften:

Die Oberseite sorgt durch die hohe Punktelastizität für eine sehr gute Druckentlastung und nimmt die Körperkontur sehr weich auf. Insbesondere schwerere und ausgeprägte Körperpartien wie Schulter und Gesäß werden druckentlastend aufgenommen und optimal belüftet. Der verstärkte Seitenrand erleichtert das Aufstehen aus der Sitzposition.

Einsatzbereich:

Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei allen Dekubitustherapien (Stadium I bis IV) ihren Beitrag.

Empfohlen bis ca. 140 kg / BMI 44