

Kombinieren Sie die Matratze Rhombo-Care® Prevent Plus mit einem dieser Matratzenbezüge:



RC Prevent Plus mit Bezug Rhombo-Care® Semy Air

Farbe: weiß/grau + hellgrau
einseitige Wischdesinfektion / waschbar bis 60°C
Größe 90 x 200 x 15 Art.Nr. 19.148
Größe 100 x 200 x 15 Art.Nr. 19.151



Unterseite

RC Prevent Plus mit Bezug Klintex

Farbe: hellgrau / blau
Wischdesinfektion / kochwaschbar
Größe 90 x 200 x 15 Art.Nr. 19.848
Größe 100 x 200 x 15 Art.Nr. 19.851



RC Prevent Plus mit Bezug Rhombo-Care®

Semy Plus EA*
Farbe: hellgrau / schwarz
Wischdesinfektion / kochwaschbar
Größe 90 x 200 x 15 Art.Nr. 19.348
Größe 100 x 200 x 15 Art.Nr. 19.351
* Spezialbezug mit Evakuierungsfunktionen (integrierte Transportschlaufen und Sicherungsurte)



RC Prevent Plus mit Bezug Rhombo-Care® Air

rundum Strickware
Farbe: weiß/grau
waschbar bis 60°C
Größe 90 x 200 x 15 Art.Nr. 19.448
Größe 100 x 200 x 15 Art.Nr. 19.451

Bezugsquelle
Österreich:




hospitaltextil
MEDICAL CARE

Hospital-Textil
Albert-Schweitzer-Straße 7 • A-4614 Marchtrenk
Tel.: +43(0)72 43 520320
Fax: +43(0)72 43 52032 20
office@hospital-textil.at • www.hospital-textil.at



Rhombo-Care® Prevent Plus

Antidekubitusmatratze

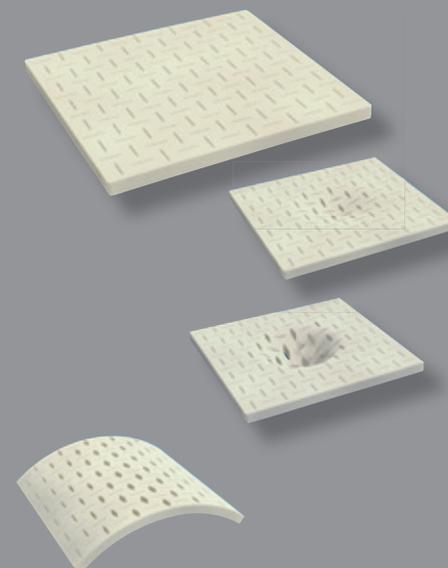

*Das PLUS an Komfort
dank Rhombo-therm® Auflage*

Neue Matratzengeneration der *Rhombo-Care*[®] Serie

Rhombo-Care[®] Prevent Plus

die Sensitive mit zusätzlicher *Rhombo-therm*[®] Auflage

Antidekubitusmatratze mit sensitiven Flextubes für weiches Eintauchen insbesondere bei niedrigem Körpergewicht. Durch die *Rhombo-therm*[®]-Auflage sehr gut geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapie: optimale Luftzirkulation, hervorragender Wärmeaustausch.

Erhältlich mit dem neuartigen Bezug **Rhombo-Care[®] Semy Air** mit flüssigkeitsdichtem Reißverschluss: eine Seite aus superweichem Doppeltuch, die andere Seite mit Hygienebeschichtung.

Raumgewicht der Flextubes: 80 kg/m³
Größe der Flextubes: 60 mm, gelocht
Rhombo-therm[®] Auflage: RG 40 kg/m³
Seitenrand besonders verstärkt - RG 55 kg/m³
Dauerhaltbarkeit: nach LGA 100 von 100 Punkten

Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei allen Dekubitustherapien (Stadium I bis IV) ihren Beitrag.

Hilfsmittelnr.:
11.29.05.1017

Rhombo-Medical[®] Matratzen sind abgestimmt auf Pflegebetten, die der Norm IEC 60201-2-52:2009 (Sicherheit medizinisch genutzter Betten) entsprechen.



Anwendungsstudie zur Rhombo-Care[®] Prevent kann angefordert werden!



Der Kernaufbau der *Rhombo-Care*[®] Prevent Plus

- ① *Rhombo-therm*[®] aus speziellem Schaum sichert ideales weiches Einsinken des Körpers und gute Belüftung
- ② Sensitive Flextubes sorgen für superweiche Aufnahme und hohe Unterstützung des Körpers sowie eine gute Luftzirkulation
- ③ Basiskern mit 7-Körperzonen-Bohrungen unterstützt die durchgängig gute Belüftung
- ④ Seitenrandverstärkung gibt Sicherheit in der sitzenden Position und erleichtert das Aufstehen