

Die Ruhe, die beweglich hält.®


R H O M B O
M E D I C A L



Pflegeprofis vertrauen.

Prophylaxe, Therapie, komfortables Liegen.
Unsere Artikelübersicht.

Gut gefüllt. Gut gefühlt. Auf die Inhalte kommt es an!

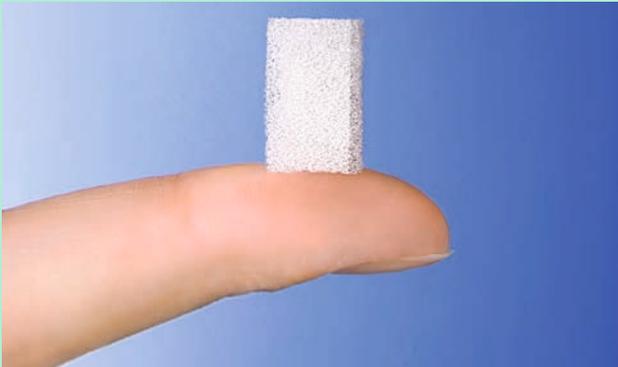

Rhombo-fill®


*Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.*

- druckentlastend
- stützend
- atmungsaktiv
- dauerelastisch
- temperaturnausgleichend
- feuchtigkeitsausgleichend
- strapazierfähig
- allergieneutral
- langlebig
- bis 95°C waschbar

Rhombo-fill® – speziell entwickelt zur druckentlastenden Weichlagerung. *Rhombo-fill®* ist das in der Krankenpflege bewährte Füllmaterial in Form von rhombisch geschnittenen PUR-Luftzellenstäbchen in RHOMBO-MEDICAL® Kissen und Auflagen. *Rhombo-fill®* Luftzellenstäbchen bestehen zu 97% aus Luft und zu 3% aus sehr elastischen und strapazierfähigen PUR-Membranen.



Keine Weichspüler verwenden

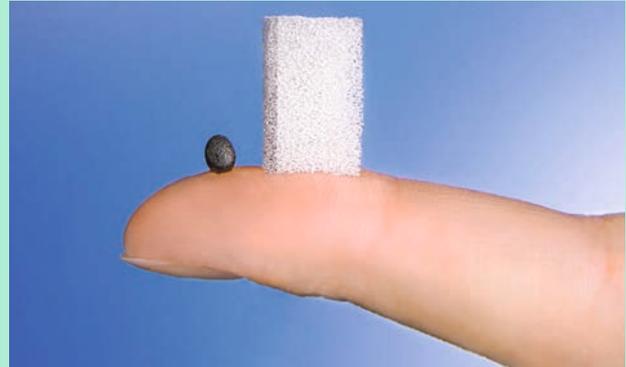

Rhombo-med®

*Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polyesterperlen.*

- positionsstabilisierend
- anschmiegsam
- bewegungsunterstützend
- atmungsaktiv
- temperaturnausgleichend
- feuchtigkeitsausgleichend
- strapazierfähig
- allergieneutral
- langlebig
- bis 95°C waschbar

Rhombo-med® – das in der Krankenpflege bewährte Füllmaterial für Spezial-Kissen zur stabilisierenden Positionierung und Entlastungslagerung von zu pflegenden Menschen. *Rhombo-med®* besteht aus *Rhombo-fill®* Luftzellenstäbchen kombiniert mit Polyester-Perlen aus PP. Das fließende Füllmaterial *Rhombo-med®* schmiegt sich perfekt an die Körperkontur an und stützt den Körper.



Thermopatches nicht möglich.
Keine Weichspüler verwenden

RHOMBO-MEDICAL®

Rhombo-Medical® – die Marke hochwertiger Medizinprodukte rund um die Themen gesundes Liegen, Lagern und Sitzen.

Basierend auf fundierten Erkenntnissen der professionellen Pflege, entwickelt für anerkannt prophylaktische und/oder therapeutische Anwendungen in Kliniken, Pflegeheimen, Rehabilitationseinrichtungen und in der häuslichen Krankenpflege.

Vertrauen auch Sie den professionellen RHOMBO-MEDICAL®-Produkten und erleben Sie „Die Ruhe, die beweglich hält“.



Positionierungskissen

Professionelle Positionierungskissen zur Anwendung nach den Pflegekonzepten u. a. der Basalen Stimulation, Bobath und der Kinästhetik zur Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung. Die Lagerungskissen reichen von der Basisausstattung über multifunktional einsetzbare Kissen, bis zu Kissen, die bei spezifischen Indikationen anwendbar sind.



Matratzen und Auflagen

Von der komfortablen Pflegebettmatratze bis zu Spezialmatratzen und Auflagen zur Dekubitusprophylaxe und Therapie.



Kopfkissen und Decken

Spezial-Kopfkissen und Bettdecken: pflegeleicht, hautsympathisch, langlebig, kosteneffizient.



Sitzkissen

Sitz- und Rollstuhlkissen für besonderen Sitzkomfort und zur dauerhaften Druckentlastung bei erhöhtem Dekubitusrisiko.



Anwendungen

Decken/
Kissen

Positionierungs-
kissen

Positionierungs-
kissen-Sets

Sitzkissen

Matratzen
& Auflagen





Service

Das richtige Lagerungshilfsmittel

für jede Pflegesituation – Übersicht Positionierungskissen nach Körperzonen

Anwen-
dungen

Körperzonen		Empfehlung	Seite
Kopf		Kopfkissen, Nackenstützkissen, Kapuzenkissen	8-9
		Universalhörnchen	15
Ohr		HWS-Zervikal-Ring	16
		Kopfhörnchen	16
Hals		Ohrfreilagerungsring	16
		Kopfkissen	8-9
Schulter		Nackenstützkissen	8-9
		Universalhörnchen	15
Arm		Ovale Rolle	15
		Halbrolle	13
Hand		Rhombi	12
		Lagerungskissen 25 x 80 cm	12
Lunge		Nackenstützkissen	8-9
		Universalhörnchen	15
Körper		Ovale Rolle	15
		Halbrolle	13
Oberkörper		Rhombi	12
		Lagerungskissen 25 x 80 cm	12
Hand		Rolle zur Positionsunterstützung 100 cm	13
		Lagerungskissen 45 x 90 cm	14
Lunge		Multikissen (gekammertes Beinkissen)	11
		Entspannungskissen	19
Körper		Unterarm-Manschette	19
		Armrampe	19
Oberkörper		Universalkissen 23 x 40 cm	14
		Halbrolle	13
Körper		Rhombi	12
		Kopfkissen 80 x 80 cm	8
Oberkörper		Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm	13
		Lagerungskissen 25 x 80 cm	14
Körper		IM-Pression Decke	7
		Anti-Dekubitus-Überzug	36
Körper		Anti-Dekubitus und Weichlagerungsauflage	36
		Universalkissen 25 x 80 cm	14
Körper		Matratzen	31-35
		Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm	13
Oberkörper		Sensorolle	12
		Kopfkissen 80 x 80 cm	8
Oberkörper		Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm	13
		Rückenstützkissen mit Fahne	17
Oberkörper		Universalkissen 25 x 80 cm und 45 x 80 cm	14
		Venenkissen	18
Oberkörper		Rollstuhl-Rückenpolster	27

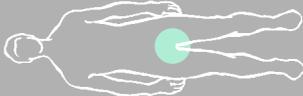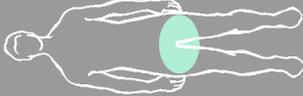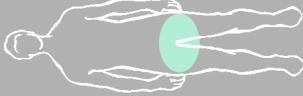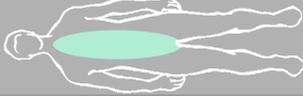Körperzonen		Empfehlung	Seite
Hüfte		Universalhörnchen 15 Lagerungsring 15 Ovale Rolle 15 Keil 13 Lagerungskissen 20 x 30 cm 14 Multikissen (gekammertes Beinkissen) 14 Rhombi 12	
Steißbein		Anti-Dekubitus-Betteinlage 36 Anti-Dekubitus und Weichlagerungsauflage 36 Universalhörnchen 15 Sitzring 17 Komfortkissen (Gesäßkissen) 11 Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm 13	
Sitzbein		Universalhörnchen 15 Komfortkissen (Gesäßkissen) 11 Entspannungskissen 19 Sitzring 17 Rolle zur Positionsunterstützung 100 cm 13 Halbrolle 13	
Gesäß		Anti-Dekubitus-Betteinlage 36 Sitzring 17 Komfortkissen (Gesäßkissen) 11 Universalkissen 45 x 80 cm 14 Sitzkissen 27-28	
Oberschenkel		Lagerungskissen 45 x 90 cm 14 Lagerungskissen mit Seitenboden 14	
Knie		Ovale Rolle 15 Runde Rolle 18 Multikissen (gekammertes Beinkissen) 11 Rhombi 12	
Ferse		Lagerungsring 15 Multikissen (gekammertes Beinkissen) 11 Unterschenkel-Manschette 18 Rhombi 12	
Fuß		Universalkissen 25 x 80 cm 14 Multikissen (gekammertes Beinkissen) 11 Unterschenkel-Manschette 18 Rhombi 12	
Bein		Rolle zur Positionsunterstützung 220 cm 13 Lagerungskissen mit Seitenboden 14 Multikissen (gekammertes Beinkissen) 11 Venenkissen 18 Sensorolle 12	
Wirbelsäule		HWS-Zervikal-Ring 16 Stufenbettkissen 17 Venenkissen 18	

Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L



Pflegeleichter Schlafkomfort

... mit Kissen und Decken, die es in sich haben.

Kopfkissen und Decken

Spezielle Bettwaren für die Pflege

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstüchchen mit dem Rhombenschnitt.

IM-Pression Decke

Die IM-Pression Decke übt aufgrund ihrer kleinen integrierten Gewichte einen sanften, gleichmäßigen Druck auf den Körper aus. Damit werden die tiefen Sensoren angeregt und eine beruhigende Wirkung hervorgerufen. Die Decke fördert die Körperwahrnehmung und vermittelt Geborgenheit. Sie ist als Tages- und als Nachtdecke einsetzbar.

Innere Unruhe, Anorexia, Demenz, Wachkoma

- Optimal für den Pflegeeinsatz
- Gutes Bettklima
- Angenehm weicher Veloursbezug
- Waschbar bis 60°C
- Trockner geeignet
- Strapazierfähig

Größe in cm	Art.-Nr. Decke	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
135 x 200	77.153	59.453	50.453



Weitere Steppdecken für den institutionellen Bereich auf Anfrage.

Decken/
Kissen

Kopfkissen und Decken

Spezielle Bettwaren für die Pflege

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombο-fill® Kopfkissen



- Ideales Kissen für die Pflege
- Leicht aufzuschütteln/klopfen
- Gesundes, trockenes Bettklima
- Stützende Wirkung bleibt dauerhaft erhalten
- Langlebig und strapazierfähig
- Bis 95°C waschbar

Größe in cm	Art.-Nr. Kopfkissen Inlett: 50% BW 50% PES	Kopfkissen Inlett: Trevira® CS schwer entflammbar	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
35 x 40	21.109	23.209	59.109	50.109
40 x 40	21.114	23.214	59.114	50.114
40 x 80	21.119	23.219	59.123	50.123
60 x 80	21.134	23.234	59.134	50.134
80 x 80	21.145	23.245	59.145	50.145

Das Kopfkissen ermöglicht ein sanftes Einsinken und stützt dabei gleichzeitig. Es lässt sich leicht aufschütteln und erfüllt höchste Hygienestandards. Das Kopfkissen ist auch als schwerentflammbare Variante lieferbar.

Sondergrößen auf Anfrage

Rhombο-fill® Nackenstützkissen



- 6-Kammersystem sorgt für ideale Stützwirkung in Seiten- und Rückenlage
- Entspannt die Nackenmuskulatur
- Stützt die Halswirbelsäule
- Stützwirkung bleibt dauerhaft erhalten

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
40 x 80	21.323	51.123	59.123	50.123

Das Nackenstützkissen besteht aus einem 6-Kammer-System, das eine ideale Stützung der Kopf- und Nackenpartie bietet sowohl in der Rückenlage als auch in der Seitenlage.

Nackenverspannungen, Kopfschmerzen



Kopfkissen

Spezielle Bettwaren für die Pflege

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Profimed® Nackenstützkissen




- Ideal in Seiten und Rückenlage
- Weich und anschmiegsam im Nacken
- Unterschiedliche Höhen durch entnehmbare Bodenplatten
- Bezug waschbar bis 60°C
- Bezug: Farbe creme

Größe in cm	Art.-Nr.
----------------	----------

40 x 80	45.119
---------	--------

Das Besondere des Nackenkissens ist der hypersofte, weiche Komfortschaumkern mit der Rhombo-med®-Einlage. Die zwei Außenkammern unterstützen durch die erhöhte Füllung, den natürlichen Stützbedarf in Seiten- und Rückenlage. Eine optimale Unterstützung wird durch das weich fließende Material ermöglicht, in das sich die Kopf- und Nackenpartie während des erholsamen Schlafs einmodellieren kann. Dieses Kissen wurde unter Begleitung von professionell arbeitenden Physiotherapeuten entwickelt.

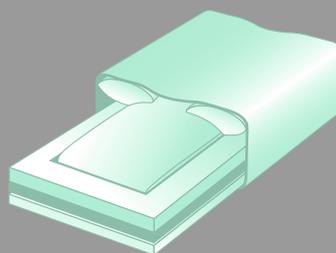

Rhombo-fill® Kapuzenkissen



- Übt sanften Druck aus und wirkt beruhigend und entspannend
- Kapuzenelement mit integrierten kleinen Gewichten
- Stimuliert Tiefenentspannung
- Kapuzenelement ist abnehmbar
- Die Füllung des Kissens schmiegt sich optimal an die Körperkontur an
- Bis 60°C waschbar

Größe in cm	Art.-Nr.
----------------	----------

40 x 80	21.719
---------	--------

Das Kapuzenkissen kann hilfreich für Menschen sein, die zur inneren Unruhe neigen oder weniger gut einschlafen können, weil sie nur schwer „abschalten“ können. In das Kapuzenelement des Kissens sind kleine Gewichte eingearbeitet. Positioniert man die Kapuze auf der Stirn oder auf den Vorderkopf kann das Kissen seine Wirkung entfalten und zur Tiefenentspannung stimulieren. Das Kapuzenelement ist mit einem Reißverschluss mit dem Kopfkissen verbunden und kann einfach abgenommen werden.



Weitere Kopfkissen für den institutionellen Bereich auf Anfrage.

Decken/
Kissen

Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L



Entlastung für den Körper

... mit Positionierungskissen, die sich jeder Situation anpassen.

Positionierungskissen

Multifunktionale Positionierungskissen

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombο-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.

Rhombο-med® Multikissen (gekammertes Beinkissen)




- Multifunktional einsetzbar
- Hochlagern von Extremitäten
- Einsetzbar zur Um- und Freilagerung sowie zur unterstützenden Lagerung
- Bobath-Lagerung

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
75 x 75	43.077	51.077	59.077	50.077

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.0008

Das Multikissen ist aufgrund seiner gekammerten Form multifunktional einsetzbar, ob zur Rolle geformt oder aufgeschüttelt als Rampe, zur Verwendung für die Arm-, Rücken- und Beinpartie.

Venenleiden, Ödembildung, Dekubitusprophylaxe insbesondere der Fersen

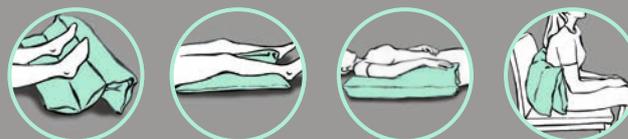

Positionierungskissen

Rhombο-fill® Komfortkissen (Gesäßkissen)



- Weichlagerung und partielle Freilagerung
- Einsetzbar in Sitz- und Liegeposition

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
60 x 75	33.132	51.032	59.032	50.032

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1002

Das Komfortkissen wurde zur Weichlagerung des Gesäßes entwickelt. Die speziell geformte Aussparung dient zur Freilagerung der gefährdeten Region in Liege- oder Sitzposition. Auch hervorragend als Rückenkissen im Sitzen geeignet zum Schutz der Wirbelsäule vor Druckbelastungen.

Hämorrhoiden, Analläsionen, nach gyn. OP, Kachexie (im Sitzen), Skoliose, Dekubitusprophylaxe im Steißbereich



Positionierungskissen

Positionierungskissen für Pflegekonzepte

Rhombofill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombomed®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.

Positionierungskissen




Rhombomed® Sensorolle

- Vielseitig einsetzbar
- Basale Stimulation
- Kinästhetische Lagerung
- Zur stützenden und stabilisierenden Lagerung
- Fördert die Körperwahrnehmung

Die Sensorolle wird bevorzugt im Rahmen der Basalen Stimulation eingesetzt. Sie lässt sich aufgrund ihrer Form leicht und flexibel an die Körperkontur anmodellieren. Sie dient bei bettlägerigen Menschen dazu, einen Verlust der Wahrnehmung des eigenen Körpers vorzubeugen. Die Sensorolle hilft den eigenen Körper zu spüren und fördert die Wahrnehmung in den Grenzbereichen des Körpers.

Umlagerung zur Dekubitusprophylaxe, Förderung der Körperwahrnehmung

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Ø 12 x 140	46.500	51.501	59.501	50.501
Ø 12 x 250	46.600	51.601	59.601	50.601

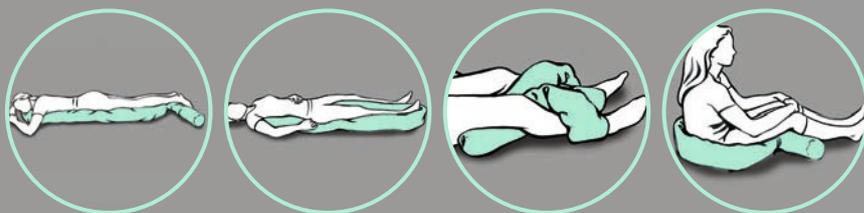

Rhombomed® Rhombi

- Basale Stimulation
- Ideales Kissen für die Mikrolagerung
- Fördert die Körperwahrnehmung

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
15 x 30	46.900	51.901	59.901	50.901

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1012

Um kleinste Schwerpunktverlagerungen bei zu pflegenden Menschen zu erreichen, wird das Rhombi-Kissen zur Mikrolagerung verwendet. Es dient der Druckentlastung, da Mikrobewegungen des Körpers nachgeahmt werden. Die Förderung der Eigenbewegung und Körperwahrnehmung wird unterstützt.

Positionsunterstützung, Freilagerung von Körperpartien, Dekubitusprophylaxe, Unterstützung der Körpermassen



Positionierungskissen

Positionierungskissen für Pflegekonzepte

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombο-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Rhombο-med® Rolle zur Positionsunterstützung

- Vielseitig einsetzbar
- Kinästhetische Lagerung
- Basale Stimulation
- Zur stützenden und stabilisierenden Lagerung
- Fördert die Eigenbewegungen und Körperwahrnehmung

Die Rolle wird bevorzugt im Rahmen des kinästhetischen Handlungskonzepts eingesetzt. Sie ermöglicht vielfältige stabilisierte Lagerungen des zu pflegenden Menschen, lässt seine Eigenbewegungen zu und fördert die Wahrnehmung des eigenen Körpers.

Umlagerung zur Dekubitusprophylaxe, Förderung der Körperwahrnehmung, Kontrakturreprophylaxe

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Ø 20 x 100	46.100	51.101	59.101	50.101
Ø 20 x 220	46.200	51.201	59.201	50.201
Hilfsmittelnr.:		für Art.-Nr. 46100 11.11.05.1006	für Art.-Nr. 46.200 11.11.05.1005	



Positionierungskissen



Positionsunterstützung nach Klein

- Mikrolagerung
- Kinästhetische Lagerung
- Fördert Eigenbewegungen und die Körperwahrnehmung

Halbrolle

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
25 x 9 x 4,5	46.300	51.301	59.301	50.301

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1004



Die Halbrolle wird im Rahmen der Unterstützung und Freilagerung eingesetzt.

Der Keil wird bei der Mikrolagerung verwendet um kleinste Schwerpunktverlagerungen am zu pflegenden Menschen zu erreichen. Auf diese Weise werden Mikrobewegungen des Körpers nachgeahmt, die der Druckentlastung dienen können. Diese Form der Lagerung fördert die Eigenbewegung der zu Pflegenden und verbessert die Körperwahrnehmung.

Freilagerung von Körperpartien, Dekubitusprophylaxe, Unterstützung der Körpermassen

Keil

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
25 x 20 x 10	46.400	51.401	59.401	50.401

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1003



Positionierungskissen

Basisprodukte der professionellen Lagerung

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombο-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Das Universalkissen ist optimal voluminös aufgrund seines eingearbeiteten Seitenbodens. Es kann vielfältig zur druckentlastenden Weich- oder Freilagerung verwendet werden.

Rhombο-fill® Universalkissen

- Vielseitig einsetzbar
- Weichlagerung und Freilagerung
- Umlagerung

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Bezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
23 x 40	32.804	51.004	59.004	50.004
25 x 80	32.805	51.105	59.105	50.105
40 x 60	32.818	51.018	59.018	50.018
45 x 80	32.823	51.023	59.023	50.023

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1009



Positionierungs-
kissen



Das Lagerungskissen ist vielseitig einsetzbar wie z. B. zur stabilisierenden Lagerung, zur unterstützenden Lagerung oder zum Hochlagern von Gliedmaßen.

Rhombο-med® Lagerungskissen

- Vielseitig einsetzbar
- Stabilisierende Lagerung
- Möglichkeit der Hochlagerung

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
20 x 30	40.202	51.002	59.002	50.002
25 x 80	40.205	51.005	59.005	50.005
30 x 40	40.206	51.006	59.006	50.006
40 x 60	40.218	51.118	59.118	50.118
40 x 80	40.219	51.019	59.019	50.019
45 x 90	40.275	51.075	59.075	50.075
50 x 70	40.226	51.026	59.026	50.026

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1011



Rhombο-med® Lagerungskissen mit Seitenboden

- Stabilisierende Lagerung
- Besonders langes Kissen zum Lagern des gesamten Beines
- Fördert die Körperwahrnehmung



Das Lagerungskissen mit Seitenboden ist besonders lang und voluminös. Es eignet sich deshalb zum stabilisierenden Lagern des gesamten Beines wie z. B. in der 135°-Lage.

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
55 x 90	42.876	51.076	59.076	50.076

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1010



Positionierungskissen

Basisprodukte der professionellen Lagerung

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Rhombo-fill® Universalhörnchen

- Zur Unterstützung verschiedener Körperbereiche
- Zur Weich- und Freilagerung

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Ø 40	32.586	51.086	59.086	50.086

Das Universalhörnchen dient im Liegen zur Unterstützung der Halswirbelsäule. Das Kissen kann auch zur Weichlagerung im Gesäßbereich eingesetzt werden.



Positionierungs-
kissen



Rhombo-fill® ovale Rolle

- Zur Weichlagerung einzelner Körperpartien

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Ø 14 x 22 x 55	32.781	51.081	59.081	50.081

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1008

Die ovale Rolle dient zur Weichlagerung einzelner Körperpartien und kann zur Kontrakturprophylaxe eingesetzt werden.



Rhombo-fill® Lagerungsring

- Zur lokalen Weich- bzw. Freilagerung
- 6 cm Öffnung

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Ø 20	32.484	51.084	59.084	50.084

Der Lagerungsring dient zur lokalen Druckentlastung von Ferse, Knöchel, Ellenbogen, Knie, Hand und Ohr. Er kann auch in der Seitenlage zwischen den Knien zur Druckentlastung eingesetzt werden sowie zur Druckentlastung der Schulter in der 135°-Lage. Bei besonderer Empfindlichkeit in Kombination mit einem Schutzbezug verwenden.



Positionierungskissen

Kissen für spezifische Indikationen

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Rhombo-fill® Ohrfreilagerungsring

- Freilagerung des Ohres
- Anpassung an den Nacken
- Ideal für die Seitenlage
- Große Öffnung ca. 12 cm

Dieser Lagerungsring wurde speziell zur Druckentlastung der Ohrmuschel in Seitenlage entwickelt. Die Öffnung ist besonders groß gearbeitet, so dass die komplette Ohrmuschel freigelagert werden kann. Das weiche Material schmiegt sich perfekt an das Seitenprofil von Kopf und Hals an. Der Lagerungsring hat einseitig eine gerade Form zur optimalen Nutzung.

Leiden im Ohrbereich, Prophylaxe Dekubitus der Ohrmuschel

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
ca. Ø 30	32.688	51.688	59.688	50.688



Rhombo-med® HWS-Zervikal-Ring

- Zur Ruhigstellung
- Zur Freilagerung



Der HWS-Zervikal-Ring dient zur weitgehenden Ruhigstellung des Kopfes und des Nackenbereichs in Rücken- und Seitenlage.

Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich, Schleudertrauma

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Ø 50	41.387	51.087	59.087	50.087



Rhombo-med® Kopfhörnchen

- Zur stabilisierten und gesicherten Freilagerung des Kopfes
- Größe durch Klettverschluss variabel, somit anpassbar an die Kopfgröße
- Lieferung inkl. Baumwoll-Schutzbezug



Das Kopfhörnchen dient zur stabilisierenden Lagerung des Kopfes und wird stets inkl. Baumwoll-Schutzbezug geliefert. Durch den Klettverschluss kann das Kopfhörnchen individuell an die Größe des Kopfes angepasst werden.

Dekubitusprophylaxe des Hinterhauptes, Beatmungspatienten, Terminalpflege

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Ø 36	43.685	51.085	59.085	50.085



Positionierungskissen

Positionierungskissen

Kissen für spezifische Indikationen

Rhombofill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombomed®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Rhombomed® Stufenbettkissen

- Zum Hochlagern der Beine
- Optimiertes Strecken der Wirbelsäule
- Entlastung der Lendenwirbel
- Unterstützt den venösen Blutfluss
- Schmiegt sich gut an die Beinform an
- Rundum abwaschbare Hülle

Das Kissen dient zum Hochlagern der Beine in der Stufenbettlage. Die Wirbelsäule wird entlastet, die Bandscheiben können sich optimal regenerieren. Durch einfaches Drehen kann das Kissen an unterschiedliche Beinlängen angepasst werden.

Bandscheibenvorfall, Ischialgien

Größe in cm	Art.-Nr.
50 x 50 x 38	43.424



Positionierungskissen



Rhombomed® Rückenstützkissen mit Fahne

- Gesicherte, stabilisierte Lagerung

Das Rückenstützkissen mit Fahne stabilisiert und stützt in 30°-Lage. Der zu pflegende Mensch liegt auf der Kissenfahne und sichert mit seinem eigenen Körpergewicht das Kissen vor dem Verrutschen.

Umlagerung zur Dekubitusprophylaxe bei unruhigen Menschen

Größe in cm	Art.-Nr.
80 x 60	41.934
90 x 65	41.937

Hilfsmittelnr.: 11.11.05.1007



Rhombofill® Sitzring

- Weich- bzw. lokale Freilagerung
- Druckentlastung im Gesäßbereich
- Öffnung ca. 13 cm

Der Sitzring dient zur lokalen Druckentlastung im Gesäßbereich. Er wird, abhängig vom Körpergewicht des Anwenders, in zwei Volumengrößen angeboten: ohne Seitenboden bis 60 kg Körpergewicht und mit Seitenboden über 60 kg Körpergewicht.

Analläsionen, nach gyn. OP, Hämorrhoiden, Dekubitusprophylaxe

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
ab 60 kg Ø 50/12	31.188	51.188	59.188	50.188
bis 60 kg Ø 50/12	31.088	51.088	59.088	50.088



Positionierungskissen

Kissen für spezifische Indikationen

Rhombofill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombomed®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Rhombomed® Venenkissen

- Optimiertes Hochlagern der Beine
- Schmiegt sich lückenlos an die individuelle Beinform an
- Entlastung der Lendenwirbel
- Unterstützt den venösen Blutfluss
- Version 1 mit festem Kern, anschmiegsam
- Version 2 nur mit Rhombo med gefüllt, flexibel einsetzbar

Das Venenkissen unterstützt die therapeutische Lagerung der Beine bei venös bedingten Beschwerden, der venöse Blutfluss wird verbessert und es kann zur Entlastung der Wirbelsäule eingesetzt werden.

*Venenleiden, Lendenwirbelleiden, Ödem-
bildung in den Beinen, Thrombose,
Krampfadern, Wadenmuskelkrämpfe,
müde, geschwollene Beine*

Artikel	Art.-Nr.	Ausführung 1	Ausführung 1	Ausführung 2	Ausführung 2
Größe in cm		Schutzbezug	Schutzbezug	Schutzbezug	Schutzbezug
		abwaschbar	Climate Soft®	Baumwolle	abwaschbar
1	70 x 55 x 17	44.150	59.050		
2	69 x 63 x 20	44.140		51.040	59.040



Rhombomed® runde Rolle

- Zur stützenden und stabilisierenden Lagerung einzelner Körperpartien



Die runde Rolle dient zur stützenden und stabilisierenden Lagerung einzelner Körperpartien. Insbesondere unter den Knien anzuwenden.

*Bauchschmerzen, Entspannung der Bauch-
decke, Entlastung der Lendenwirbelsäule
in Rückenlage*

Größe	Art.-Nr.	passender	passender	passender
in cm		Schutzbezug	Schutzbezug	Schutzbezug
		Baumwolle	abwaschbar	Climate Soft®
Ø 18 x 55	42.983	51.183	59.183	50.183



Rhombomed® Unterschenkel-Manschette

- Besondere Freilagerung der Ferse durch Fixierungsmöglichkeit
- Starke Bewegungen werden verhindert



Die Unterschenkel-Manschette dient zur Freilagerung der Ferse. Die weich gepolsterte Befestigungsmanschette wird sicher am Unterschenkel fixiert.

*Freilagerung zur Dekubitusprophylaxe bei
Demenz*

Größe	Art.-Nr.
in cm	
55 x 20 x 8	30.328



Positionierungskissen

Kissen für spezifische Indikationen

Rhombo-fill®
Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®
Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



Das Kissen kann an unterschiedlichen Positionen des Körpers eingesetzt werden. Insbesondere unter dem Arm positioniert kann es Geborgenheit vermitteln. Doch das Kissen kann durch seine Form auch zwischen den Knien oder im Rücken eingesetzt die nötige Unterstützung gewährleisten.

Menschen mit eingeschränkter Bewegung, ältere Menschen, Menschen mit einer körperlichen Behinderung

Rhombo-med® Entspannungskissen

- Sehr gute Anpassung an den Körper
- Fördert das Wohlbefinden
- Unterstützt die Wahrnehmung

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Baumwoll-Bezug	passender Hygienebezug (Semy)	passender Bezug Climate Soft®
30 x 65	46.700	51.701	59.701	50.701



Positionierungskissen



Die weich gepolsterte Befestigungsmanschette des Kissens fixiert sicher den Unterarm.

Infusionstherapie, Ödembildung

Rhombo-med® Unterarm-Manschette

- Hochlagerung des Unterarms
- Gesicherte Positionierung des Unterarms

Größe in cm	Art.-Nr.
40 x 16 x 13	40.612



Rhombo-med® Armrampe

- Hochlagerung von Extremitäten

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
35 x 20 x 12	40.707	51.007	59.007	50.007
80 x 25 x 25	40.744	51.044	59.044	50.044



Die Armrampe dient zur ruhigstellenden Lagerung des gesamten Armes oder auch nur des Unterarmes.

Kontrakturrephylaxe, Ödembildung



Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L



Rundum professionell unterstützen
... mit Kissen-Sets für individuelle Pflegesituationen.

Positionierungskissen-Sets

Zur Prophylaxe und Therapie

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.



RHOMBO-MEDICAL® Grundlagerungs-Set

- Vielfältige prophylaktische und therapeutische Lagerungsmöglichkeiten

Artikel	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Set	99.005	95.105	95.905	95.005
Bestehend aus:				
Komfortkissen	33.132	51.032	59.032	50.032
Universalkissen	32.823	51.023	59.023	50.023
Multikissen	43.077	51.077	59.077	50.077

Das Positionierungs-Set ist die optimale Grundausstattung für die Pflege, da mit den einzelnen Kissen des Sets oder deren Kombination nahezu alle prophylaktischen und therapeutischen Lagerungen möglich sind.

Dekubitusprophylaxe durch Frei- und Umlagern, Venenleiden, Kontrakturen



Positionierungs-
kissen-Sets



RHOMBO-MEDICAL® Kissenbett-Set

- Weichlagerung und partielle Freilagerung
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Artikel	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Set	99.002	95.102	95.902	95.002
Bestehend aus:				
6 Universalkissen 45 x 80 cm	32.823	51.023	59.023	50.023

Dieses Positionierungs-Set besteht aus 6 Rhombo-fill® Universalkissen, aus denen ein Kissenbett zur Weichlagerung und partiellen Freilagerung gelegt werden kann. Druckgefährdete Körperbereiche wie Wirbelsäule, Steiß und Fersen werden frei gelagert.

Terminalpflege, Schmerzpatienten, Osteoporose, Superweichlagerung zur Dekubitusprophylaxe



Positionierungskissen-Sets

Zur Prophylaxe und Therapie

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polyesterperlen.

RHOMBO-MEDICAL® Kissen-Set zur Positionierung nach Bobath



- Positionierung nach Bobath
- Sensorische Stimulation
- Fördert die Körperwahrnehmung

Das 6er-Set ist an die Bobath-Lehre angepasst. Menschen können so individuell unterstützt werden. Das kleine Rhombi Kissen kann einzelne Körperpartien perfekt stützen. Die stärker betroffene Körperseite kann sensorisch stimuliert werden.

Schlaganfall, Hirnblutungen, Lähmungen und andere Krankheiten des zentralen Nervensystems

Artikel	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Set	99.011	95.111	95.911	95.011
Bestehend aus:				
Nackenstützkissen	21.323	51.123	59.123	50.123
Kissen mit Boden	42.876	51.076	59.076	50.076
Kissen mit Fahne	41.937			
Multikissen	43.077	51.077	59.077	50.077
2 x Rhombi	46.900	51.901	59.901	50.901



RHOMBO-MEDICAL® AVT-Prophylaxe-Set


- Dehnung der Lunge
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Fördert die Körperwahrnehmung



Artikel	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Set	99.004	95.104	95.904	95.004
Bestehend aus:				
2 Lagerungskissen 25 x 80 cm	40.205	51.005	59.005	50.005

Das Kissenset besteht aus zwei Rhombo-med® Positionierungskissen, die – zeitlich be-grenzt – in A-, V- oder T-Form unter den Oberkörper platziert werden mit dem Ziel, eine bessere Belüftung von pneumonie-gefährdeten Lungenbereichen zu erreichen.

Pneumonieprophylaxe, Verbesserung der Belüftung der Lunge, Körperwahrnehmung

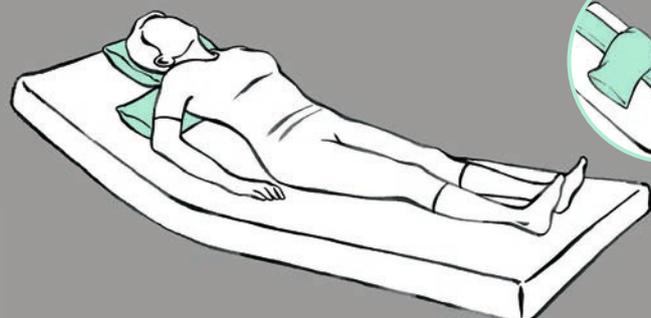

Positionierungskissen-Sets

Zur Prophylaxe und Therapie

Rhombο-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombο-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.

RHOMBO-MEDICAL® Kinästhetik-Positionierungs-Set I

- Kinästhetische Lagerung
- Basale Stimulation
- Mikrolagerung

Artikel	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Set	99.017	95.117	95.917	95.017
Bestehend aus:				
Rolle 20 x 220 cm	46.200	51.201	59.201	50.201
2 Halbrollen 25 x 9 x 4,5 cm	46.300	51.301	59.301	50.301

RHOMBO-MEDICAL® Kinästhetik-Positionierungs-Set II

Artikel	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Set	99.027	95.127	95.927	95.027
Bestehend aus:				
Rolle 20 x 100 cm	46.100	51.101	59.101	50.101
2 Halbrollen 25 x 9 x 4,5 cm	46.300	51.301	59.301	50.301
2 Keile 25 x 20 x 10 cm	46.400	51.401	59.401	50.401

Positionierungs-
kissen-Sets



Abb. zeigt Anwendung des Kinästhetik-Lagerungsset I

Das Kissen-set in zwei Variationen ist die ideale Ausstattung zur Lagerung nach den Konzepten der Kinästhetik, der Basalen Stimulation und kann auch im Rahmen der Mikrolagerung eingesetzt werden.

Umlagern, Therapeutisches Lagern, Wahrnehmungsförderung und vieles mehr

Positionierungskissen-Sets

Zur Prophylaxe und Therapie

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.

RHOMBO-MEDICAL® Atemunterstützendes Set

- Sanfte Unterstützung und Dehnung des Thorax/Brustkorbs
- Vielfältige Möglichkeiten



Artikel	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Set	99.008	95.108	95.908	95.008
Bestehend aus:				
2 Universalkissen 25 x 80 cm	32.805	51.105	59.105	50.105

Das Kissenset besteht aus zwei *Rhombo-fill®* Universalkissen und unterstützt die Atemhilfsmuskulatur z. B. bei chronischen Lungenerkrankungen.

COPD wie Asthma, chr. Bronchitis, Dekubitusprophylaxe zur Umlagerung bei gleichzeitigen Schmerzen



RHOMBO-MEDICAL® Sensorrollen-Set


- Basale Stimulation
- Fördert die Körperwahrnehmung
- Stützende und stabilisierende Lagerung



Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar	passender Schutzbezug Climate Soft®
Ø 12 x 250	99.009	95.109	95.909	95.009
Bestehend aus:				
2 Sensorrollen 12 x 250 cm	46.600	51.601	59.601	50.601

Die beiden Rollen werden in Rückenlage seitlich neben dem Körper anmodelliert. Dadurch erhält der zu Pflegende eine Möglichkeit, seine Körpergrenzen zu spüren und sich dadurch wahrzunehmen.

Umlagern, Therapeutisches Lagern, Wahrnehmungsförderung und vieles mehr

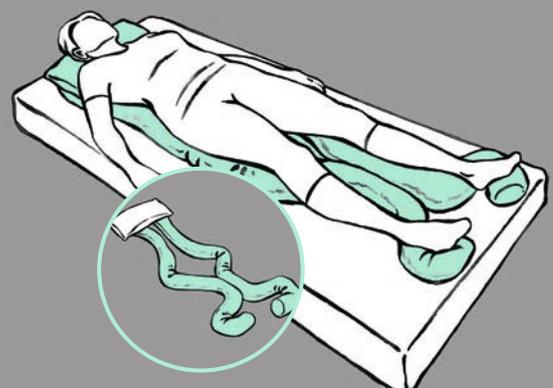

Die Bezug-Materialien

Schutzbezüge für Positionierungskissen

RHOMBO-MEDICAL® Schutzbezug abwaschbar

Die angebotenen, abwaschbaren Schutzbezüge sind hochwertige, elastische Hygienebezüge und bestehen aus einem polyurethankaschierten Jersey. Die mikrofeine, atmungsaktive Beschichtung garantiert ein angenehmes Klima. Die Schutzbezüge sind in der Regel mit Hotelverschlüssen versehen.

Material: 100% PES mit PU-Beschichtung
Farbe: creme-weiß

- Atmungsaktiv
- Klimaregulierend
- Elastisch
- Wasserdicht
- Bakterien- und virendicht
- Desinfizierbar/Wischdesinfektion
- PVC-frei
- Kochwaschbar
- Schwer entflammbar



bakterien- & virendicht



RHOMBO-MEDICAL® Climate soft®

Die angebotenen Hygienebezüge sind wasserdicht, atmungsaktiv und verfügen dennoch über einen angenehmen, sehr textilen Charakter. Die Schutzbezüge sind in der Regel mit Hotelverschlüssen versehen.

Material: 100 % PES Strickware, laminiert mit 100 % PU-Membrane
Farbe: aqua-türkis

- Atmungsaktiv
- Klimaregulierend
- Super elastisch
- Wasserdicht
- Hoch Wasserdampfdurchlässig
- PVC-frei
- Kochwaschbar
- Trocknergeeignet



wasserdicht & hautsympathisch



Positionierungs-
kissen-Sets

RHOMBO-MEDICAL® Baumwollschutzbezug

Die angebotenen Baumwollschutzbezüge bestehen aus einem sehr glatten, hochwertigen Mako-Jersey und sind besonders weich, anschmiegsam und hautsympathisch. Die Schutzbezüge sind in der Regel mit Hotelverschlüssen versehen.

Material: 100% Baumwolle
Farbe: creme

- Weich und anschmiegsam
- Hautsympathisch
- Kochwaschbar



anschmiegsam & hautsympathisch



Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L



Sitzend Freiraum genießen
... mit Stuhlkissen, die entlasten.

Sitzkissen

Rollstuhl- und Rückenkissen

Rhombο-fill®

*Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.*




Rhombο-therm® soft Kissen

- Samtweiche Oberfläche durch Veloursbezug
- Stabiles Sitzen durch Antirutschfläche an der Unterseite
- Erleichtertes Aufstehen durch 10 cm Höhe
- Weiches einsinken durch Soft-therm Auflage
- Gute Belüftung des Kerns
- Für erleichtertes Aufstehen, druckverteilende Wirkung, angenehme Höhe für kleinere Menschen

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug abwaschbar
43 x 43 x 10	34.422	59.422

Das komfortable Sitzkissen schafft durch seine Konstruktion eine angenehme Sitzhöhe. Die Oberfläche ist aus spezialisiertem Schaum gearbeitet, der die Körperkontur spürbar sanft und punktelastisch aufnimmt und unterstützt. Dadurch ist ein weiches Einsinken garantiert. Zugleich ist durch das patentierte Verfahren der Schnitttechnik von Rhombo-therm eine gleichmäßig gute Belüftung gegeben. Das erhöhte, sichere Sitzen wird durch den kuscheligen Velours auf der einen Seite und die Antirutschfläche auf der anderen Seite sehr gut gewährleistet.

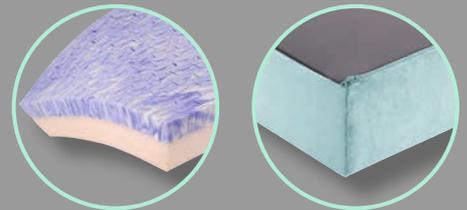

Rhombο-fill® Rollstuhl-Rückenpolster

- Gute Klimatisierung und Feuchtigkeitsregulierung
- Druckentlastung
- Weiche Unterstützung
- Höherer Sitzkomfort
- Stuhl und Rollstuhl geeignet

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Trevira CS	passender Schutzbezug abwaschbar
40 x 57	31.617	53.017	59.017

Das Rollstuhl-Rückenpolster ist sehr formstabil. Es polstert weich die Rückenpartie und bietet Druckentlastung. Das Rückenpolster wird mit Klettband an der Rückenlehne befestigt.

Sitzkissen

Sitz- und Rollstuhlkissen

Gesäßkissen

Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.



Rhombo-fill® Arthrosekissen

- Ergonomische Sitzposition
- Erleichtert das Aufstehen aus Sitzmöbeln
- Fördert hüftschonendes Sitzen
- Weiches Einsinken des Gesäßes
- Druckentlastung

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Trevira CS	passender Schutzbezug abwaschbar
42 x 44	33.820	53.020	59.020

Bei Arthrose der Hüftgelenke hat sich das Arthrose-Sitzkissen als praktische Alltagshilfe bewährt, da es ein gelenkschonendes Sitzen fördert und das Aufstehen erleichtert. Gesäß und Oberschenkel sinken sanft in das Kissen ein, so bleibt die Sitzhaltung auch nach vielen Stunden bequem.

Rhombo-fill® Kissen zur Sitzerhöhung

- Erleichtert das Aufstehen aus Sitzmöbeln
- Fester Kern mit weicher Oberfläche
- Weiches Einsinken des Gesäßes
- Bewegungsunterstützung
- Auch als Rollstuhlkissen verwendbar

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Trevira CS	passender Schutzbezug abwaschbar
43 x 43 x 8	34.622	53.022	59.022

Das Kissen zur Sitzerhöhung bietet hohen Sitzkomfort mit sehr guter Druckentlastung dank des Schaumstoffkerns und der 5-fach gekammerten Polsterung.

Sitz-/Roll-
stuhlkissen

Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L



Faszinierender Liegekomfort

... mit Matratzen und Auflagen, die individuelle Wünsche erfüllen.



Matratzen

Rhombio-Care® Therm Matratzen mit optimaler Balance von Druckverteilung & Körperunterstützung

Rhombio-Care® Therm Plus

Kernaufbau

Oberseite – hellblau marmoriert:

3 cm Rhombio-therm® aus Spezialschaum „Skytherm“

Mittelschicht – rosa:

3 cm 7-Zonen-Kaltschaumkern mit vertikaler
Rhombio-flex Belüftung und verstärkter Randzone,
RG 55 – mittelfest

Unterseite – gelb:

8 cm 7-Zonen-Kaltschaumkern mit vertikaler
Rhombio-flex Belüftung und verstärkter Randzone,
RG 55 – fest

Gesamthöhe:

ca. 14 cm – empfohlen bis ca. 140 kg Körpergewicht
(verwendbar bis BMI 44)

Optional mit höherem Basiskern erhältlich für
Patienten bis 200 kg Körpergewicht


Die Matratze *Rhombio-Care® Therm Plus* besitzt einen dreischichtig progressiven Aufbau – von sehr weich, über mittelfest bis fest. Die Oberseite aus Skytherm sorgt für hohe Punktlastizität sowie eine sehr gute Druckverteilung und nimmt die Körperkontur sehr weich auf. Insbesondere schwere bzw. ausgeprägte Körperpartien wie die Schulter (in Seitenlage) und das Gesäß tauchen in das Material ein, werden druckverteilend aufgenommen und optimal belüftet – für ein gesundes, trockenes Schlafklima.

Die Skytherm-Schicht leitet weich zur nächsten etwas festeren Matratzenmitte über bis zur Matratzenbasis, die die höchste Materialfestigkeit aufweist. Der festere Seitenrand erleichtert das Aufstehen aus der sitzenden Position vom Bettrand.

Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei allen Dekubitustherapien (Stadium I bis IV) ihren Beitrag.

Größe in cm	RC Therm Plus mit Feinjersey Farbe: hellblau	RC Therm Plus mit Semy Farbe: weiß	RC Therm Plus mit Semy Plus Farbe: blau	RC Therm Plus mit Semy Plus EA Farbe: blau-schwarz
90x200x14	26.648	26.948	26.748	26.248
100x200x14	26.651	26.951	26.751	26.251

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

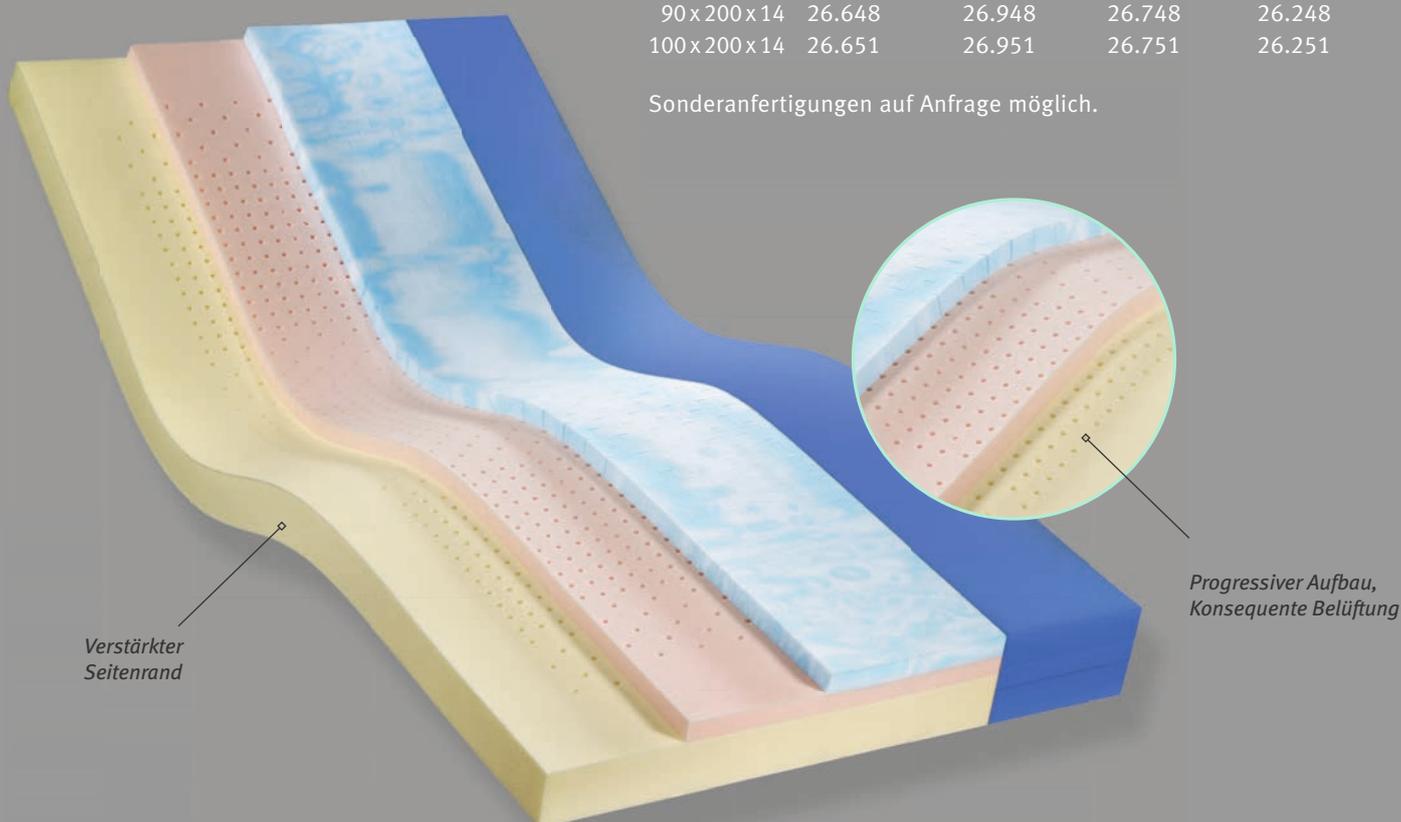

Verstärkter
Seitenrand

Progressiver Aufbau,
Konsequente Belüftung





Matratzen

Rhombio-Care® Therm Matratzen mit optimaler Balance von Druckverteilung & Körperunterstützung

Rhombio-Care® Heavy Therm

Kernaufbau

Oberseite – hellblau marmoriert:

4 cm Rhombio-therm® aus Spezialschaum
„Skytherm“, RG 40

Mittelschicht – gelb:

6 cm Kaltschaumkern mit sehr hoher Traglast,
RG 60 – sehr fest

Unterseite – rosa:

8 cm Kaltschaumkern mit hoher Traglast,
RG 50 – fest


Gesamthöhe:

ca. 18 cm – empfohlen ab 140 kg bis maximal
240 kg Körpergewicht

Dreischichtiger Aufbau mit hoher Tragkraft

Die *Rhombio-Care® Heavy Therm* wurde speziell für schwergewichtige Nutzer ab einem Körpergewicht von 140 kg konzipiert und ist eine spezielle Variante der *Rhombio-Care® Therm Plus* Matratze. Sie folgt ebenfalls dem Prinzip eines dreischichtigen Aufbaus und entspricht neusten Erkenntnissen der Schlafforschung. Sie ist hochwertig und stabil konstruiert und hält den erforderlichen besonderen und extremen Belastungen dauerhaft stand.

Die Oberseite aus Rhombio-therm soft mit Rhombio-therm-Stanzung ist die weichste Ebene des Kerns. Sie nimmt mit hoher Punktelastizität die Körperkontur auf und sorgt für eine sehr gute Druckverteilung. Die mittlere Ebene des Matratzenkerns besteht aus einem festen Schaum mit besonders hoher Tragfertigkeit. Darunter schließt sich ein weiterer sehr kompakter Schaum mit hoher Festigkeit an, der für die höchste Stützkraft innerhalb des Kernsystems sorgt und die Beweglichkeit des Körpers fördert. Die Matratze *Rhombio-Care® Heavy Therm* ist ein effektiver Beitrag zur Optimierung des Schlafkomforts für schwergewichtige Menschen.

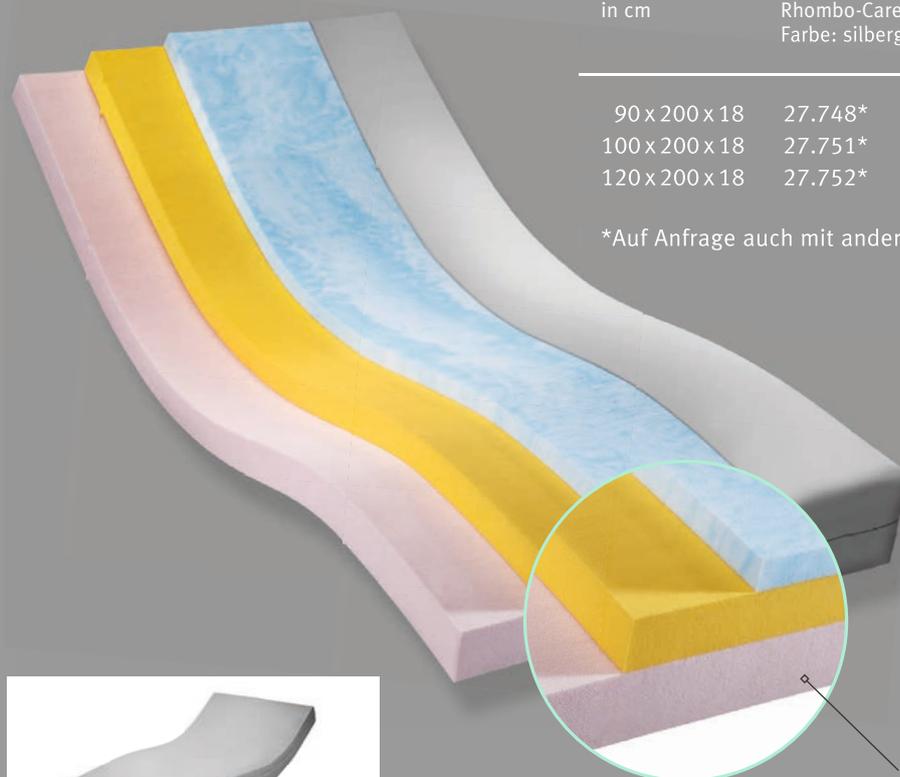

Größe

in cm

RC Heavy Therm

Rhombio-Care® Semy Plus

Farbe: silbergrau (Sonderfarbe)

90 x 200 x 18	27.748*
100 x 200 x 18	27.751*
120 x 200 x 18	27.752*

*Auf Anfrage auch mit anderen Bezügen lieferbar



Bezug mit verdecktem Reißverschluss



Dreischichtiger Aufbau,
Feste Mittelschicht

Matratzen
& Auflagen

Kern: Bezug:





Matratzen

Individuelle Pflege beginnt bei der Matratze


Die Matratze Rhombo-Care® **Vitaflex Plus** ist eine Antidekubitusmatratze zum Einsatz bei Prophylaxe und Therapien. Die Matratze ist auch für Menschen mit höherem Body-Mass-Index (BMI) absolut empfehlenswert. Rhombo-Care® **Vitaflex Plus** verfügt über hochdynamische Flextubes, welche die Körperbewegung unterstützen und besitzt eine optimale Luftzirkulation und einen hervorragenden Wärmeaustausch. Die hypersofte Skythermauflage sorgt für ein weiches Einsinken.

Auch in puncto Sicherheit hat die Matratze einiges zu bieten: Wird die Matratze mit dem Hygieneschutzbezug Rhombo-Care Semy oder Semy Plus kombiniert, erfüllt sie die Schwerentflammbarkeitskriterien gemäß DIN EN 597/1-2.

Weichlagerung, Dekubitusprophylaxe und -Therapie¹

Rhombo-Care® Vitaflex Plus

- Skytherm – der speziell bearbeitete, hypersofte Schaum passt sich dem Körper optimal an
- Skytherm löst die Oberflächenspannung auf und ist dadurch enorm punktelastisch
- Flextubes aus hochwertigem Kaltschaum zur punktuellen Unterstützung des Körpers bei gleichzeitig weichem Einsinken
- Seitenrandverstärkung gibt Sicherheit in der sitzenden Position und erleichtert das Aufstehen
- Spezialisierte Schnitttechnik an der Unterseite für gute Luftzirkulation
- Raumgewicht der Flextubes: Basis RG 55
- Größe der Flextubes: 80 mm
- Dauerhaltbarkeit: sehr gut – Härteabfall minimal
- Matratzenhöhe ca. 15 cm
- Empfohlen für Körpergewichte von 40 – 140 kg
- Sehr gut geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

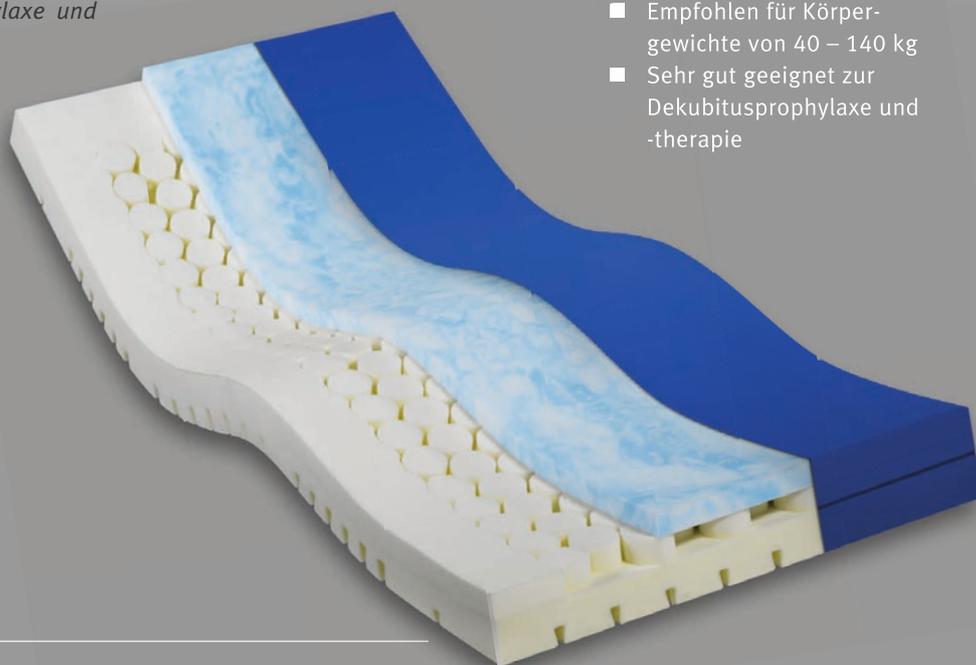

Größe in cm	RC Vitaflex mit Feinjersey Farbe: hellblau	RC Vitaflex mit Semy Farbe: weiß	RC Vitaflex mit Semy Plus Farbe: blau	RC Vitaflex mit Semy Plus EA* Farbe: blau-schwarz
90 x 200 x 15	35.648	35.948	35.748	35.248
100 x 200 x 15	35.651	35.951	35.751	35.251
	Hilfsmittelnr.: 11.29.05.0018	Hilfsmittelnr.: 11.29.05.0019		

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

¹ Beide Rhombo-Care® Matratzen bieten als Basis zur Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leisten deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei allen Dekubitus-therapien (bis Stadium 4) ihren Beitrag.

Rhombo-Medical® Matratzen sind abgestimmt auf Pflegebetten, die der Norm IEC 60601-2-52:2010 (Sicherheit medizinisch genutzter Betten) entsprechen.

Geprüfte Qualität

Berlin Cert hat als Prüf- und Zertifizierstelle für Medizinprodukte an der Technischen Universität Berlin die Matratze Rhombo-Care® **Prevent Plus** und Rhombo-Care® **Vitaflex Plus** hinsichtlich Mikroklima und Druckverteilung geprüft und positiv beurteilt. Die entsprechenden Prüfberichte liegen bei Lück vor.



Kern:

Bezug:





Matratzen

Ergonomische Superweichmatratze mit Mobilisationsunterstützung

Rhomb-Care® Prevent Plus ist eine Superweichmatratze, die hervorragend als Antidekubitusmatratze zur Prophylaxe bei Patienten bis zu einem hohen Dekubitusrisiko oder bei Dekubitustherapie geeignet ist. Der Einsatz der *Rhomb-Care® Prevent Plus* Matratze ist außerdem bei schmerzhaften Erkrankungen des Bewegungsapparates ideal wie z. B. bei Osteoporose und Schmerzzuständen. Sensitive Flextubes als Herzstück der *Rhomb-Care® Prevent Plus* Matratze sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis von superweichem Einsinken und mobilitätsfördernder Stützwirkung.


Osteoporose, Rheuma, Dekubitusprophylaxe und -Therapie¹

Rhomb-Care® Prevent Plus

- Reduziert Scherkräfte
- Seitenrandverstärkung für eine stabilisierte Sitzposition am Matratzenrand und ein erleichtertes Aufstehen
- Sehr gute Luftzirkulation
- Wahlweise mit 3 verschiedenen Bezügen lieferbar
- Raumgewicht der Flextubes: RG 80
- Matratzenhöhe ca. 15 cm
- Empfohlen für Körpergewichte von 20 – 140 kg
- Verringert Friktion
- Rhomb-therm Auflage aus Skytherm für sanftes Einsinken
- Hervorragender Wärmeaustausch
- Sehr gut geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

Sensitive Flextubes in 80 kg/m³

Extrem punktelastisch, berührungsfrei angeordnet, perfekt durchlüftet, reduzieren Scherkräfte
Raumgewicht: RG80

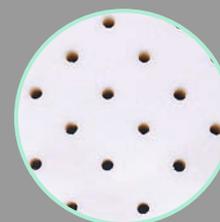

Größe in cm

Größe in cm	RC Prevent Plus Bezug Rhomb-Care® Semy Air Farbe: hellgrau + weiß/grau einseitige Wischdesinfektion	RC Prevent Plus Bezug Rhomb-Care® Semy Plus Farbe: blau Wischdesinfektion	RC Prevent Plus Bezug Rhomb-Care® Semy Plus EA* Farbe: blau-schwarz Wischdesinfektion
90 x 200 x 15	19.148	19.748	19.248
100 x 200 x 15	19.151	19.751	19.251

*Spezialbezug mit Evakuierungsfunktionen (integrierte Transportschlaufen und Sicherheitsgurte)

Hilfsmittelnr.: 11.29.05.1017

Überzeugende Ergebnisse – Studie

Die Median-Klinik in Freiburg hat in einer prospektiven Studie die Matratze *Rhomb-Care® prevent* über einen Zeitraum von 12 Monaten in der Anwendung getestet. Alle Patienten ohne Dekubitusvorerkrankungen zeigen am Ende der Studie keine Anzeichen von Dekubitus. Bei Patienten mit bestehendem Dekubitus des Grades I und II wurden Verbesserungen des Zustandes nachgewiesen.

Geprüfte Qualität

Berlin Cert hat als Prüf- und Zertifizierstelle für Medizinprodukte an der Technischen Universität Berlin die Matratze *Rhomb-Care® Prevent Plus* hinsichtlich Mikroklima und Druckverteilung geprüft und beurteilt. Die entsprechenden Prüfberichte liegen bei Lück vor.




Matratzen
& Auflagen

Auflagen

Zur Weichlagerung

Rhombο-fill®

*Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.*

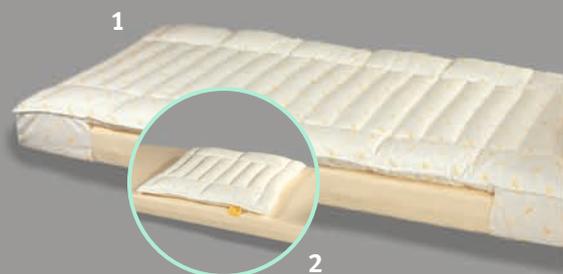

Diese einteilige Matratzenweichauflage ist 5 cm stark und verbessert den Liegekomfort insbesondere bei schmerzempfindlichen Menschen aufgrund z. B. von Rheuma oder Osteoporose. Zusätzlich sorgt sie für ein gesundes trockenes Bettklima ohne Kältebrücken.

Rheuma, Osteoporose, Dekubitusprophylaxe

Rhombο-fill® Anti-Dekubitus- und Weichlagerungsüberzug

- Zur Weichlagerung
- Empfehlenswert bei schmerzempfindlichen Menschen

Größe in cm	Art.-Nr. Ausführung 1 Überzug	Ausführung 2 Betteinlage
90 x 200	33.948	
100 x 200	33.951	
80 x 90		34.046
75 x 140		34.043



Die Rhombο-Care® **Therm Auflage** aus hypersoftem Skytherm reduziert den Auflagedruck des Körpers durch eine flächige Druckverteilung, die Haut bleibt gut durchblutet. Der Kontakt zwischen Oberfläche und Körper ist absolut bündig, sodass ein permanenter Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch stattfinden kann, Kältebrücken treten nicht auf.

Rheuma, Osteoporose, Dekubitusprophylaxe

Rhombο-Care® Therm Plus Anti-Dekubitus-Bettauflage

- Zur Weichlagerung
- Empfehlenswert bei schmerzempfindlichen Menschen
- Inklusive abnehmbarem Bezug – kochwaschbar
- Skytherm löst die Oberflächenspannung auf, ist enorm punktelastisch und passt sich dem Körper optimal an

Größe in cm	Art.-Nr.
90 x 200 x 7	79.148
100 x 200 x 7	79.151

Beschreibung des abnehmbaren Bezuges siehe Seite 37 unter Rhombο-Care® Semy Plus Hygienebezug.



Die superweiche Betauflage ist 9 cm stark und kann aufgrund ihrer intensiven Druckentlastung bei Personen mit Dekubitusrisiko und bei Schwergewichtigen eingesetzt werden. Durch die Kombination von 3 Auflagen lässt sich eine Liegefläche von 90 x 200 cm weich polstern.

Dekubitusprophylaxe


Rhombο-fill® Anti-Dekubitus- und Weichlagerungsauflage

Größe in cm	Art.-Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
67 x 90 x 9	34.339	51.039	59.039

Um eine Liegefläche von 90 x 200 cm weich zu polstern, bitte 3 Auflagen bestellen.

Bezüge

Für Matratzen

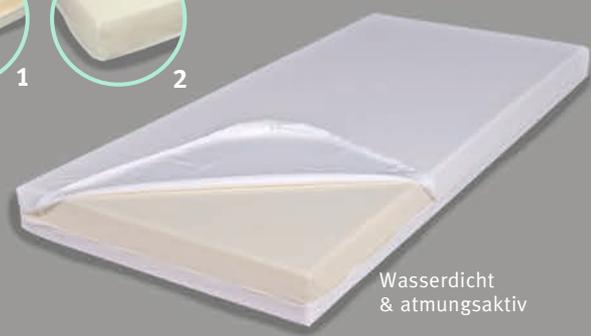

Wasserdicht & atmungsaktiv


Rhombo-Care® Semy ist ein qualitativ hochwertiger Hygienebezug und besteht aus einem polyurethan-kaschierten Jersey. Die mikrofeine, atmungsaktive Beschichtung garantiert ein angenehmes Schlafklima und einen hohen Liegekomfort. Farbe: weiß

Rhombo-Care® Semy Hygienebezug

- Verbesserter Hygieneschutz/Wischdesinfektion
- 3-seitiger Reißverschluss für leichtes Einziehen
- Schwer entflammbar

Größe in cm	Art.-Nr.	Ausführung		
		Ausführung 1 Hygienebezug	Ausführung 2 Schutzhaube	Ausführung 3 Spannbettbezug
90 x 200 x 12	59.348		59.248	59.900
100 x 200 x 12	59.351		59.251	59.900
90 x 200 x 14	59.548		59.448	
100 x 200 x 14	59.551		59.451	

Weitere Größen auf Anfrage

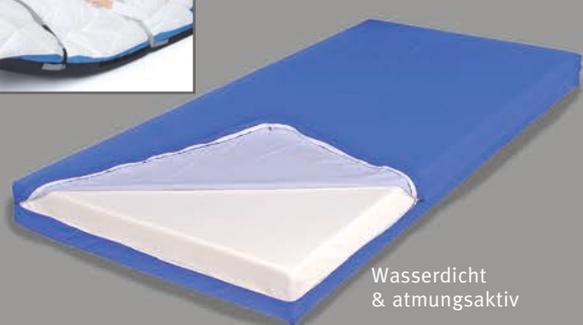

Wasserdicht & atmungsaktiv

Rhombo-Care® Semy Plus besteht aus einer mit PU-Substrat beschichteten Strickware aus Polyamid. Die mikrofeine atmungsaktive Beschichtung garantiert ein angenehmes Klima und einen hohen Liegekomfort. Farbe: blau

Rhombo-Care® Semy Plus Hygienebezug

- Verdeckter 3-seitiger Reißverschluss für leichteres Einziehen
- Verbesserter Hygieneschutz/Wischdesinfektion
- Idealer Bezug für Weichlagerungsmatratzen
- Auch mit Evakuierungsausstattung erhältlich
- Schwer entflammbar

Größe in cm	Art.-Nr.	mit Evakuierungs- ausstattung	
90 x 200 x 7	57.348		
90 x 200 x 12	57.548		57.048
90 x 200 x 14	57.648		57.048
100 x 200 x 7	57.351		
100 x 200 x 12	57.551		57.051
100 x 200 x 14	57.651		57.051

Weitere Größen auf Anfrage



Dieser anschmiegsame und hautsympathische Matratzenbezug besteht aus hochwertigem Jersey. Der Bezug zeichnet sich durch seine Elastizität und eine besonders glatte Oberflächenstruktur aus und ist kochwaschbar. Farbe: hellblau

Rhombo-Care® Fein-Jersey Matratzenbezug

- Strapazierfähiger Fein-Jersey-Bezug mit glatter Oberfläche
- Elastischer und anschmiegsamer Bezug
- Mit Sicherheitsnähten

Größe in cm	Art.-Nr.
90 x 200 x 12	53.548
100 x 200 x 12	53.551
90 x 200 x 14	53.448
100 x 200 x 14	53.451



Matratzen & Auflagen

Pflege-Infotheke

RHOMBO-MEDICAL Kissen mit *Rhombo-fill*[®] bzw. *Rhombo-med*[®] – die Ruhe, die beweglich hält[®]

Was ist ... ?

Lagerung

Die Lagerung ist ein Prozess, wobei der zu Pflegenden mit Hilfe des Pflegenden eine bestimmte Körperhaltung einnimmt. Dieses dient zur Prävention und/oder unterstützenden Therapie. Dem zu Pflegenden wird damit die wichtige passive Bewegung ermöglicht und die Eigenaktivität kann unterstützt werden, um die Beweglichkeit zu erhalten und zu fördern und/oder Dekubitus vorzubeugen.

Dekubitusprophylaxe

Alle Maßnahmen zur Vorbeugung eines Druckgeschwürs (Dekubitus) werden als Dekubitusprophylaxe bezeichnet. Bei den verwendeten Hilfsmitteln sind nicht nur druckreduzierende und schwerkraftminimierende Eigenschaften unerlässlich, sondern auch die Erhaltung und Förderung der Eigenbewegung und der Körperwahrnehmung des Patienten. Grundsätzlich werden 3 Arten der Lagerung unterschieden: Freilagern, Weichlagern und Umlagern. In der professionellen Pflege werden Lagerungspläne erstellt und mit Hilfe von Mobilisierungsprotokollen dokumentiert. Zweistündige Lageveränderungen haben sich als Anfangsrhythmus bewährt. Die aufmerksame Krankenbeobachtung bestimmt letztlich das individuelle Lagerungsintervall.

Basale Stimulation

Das Gefühl für den eigenen Körper, die Orientierung im Raum, die Sinneswahrnehmung und die Kommunikation können durch Krankheit und Bettlägerigkeit beeinträchtigt werden. Das Pflegekonzept der Basalen Stimulation wirkt dem entgegen und dient zur Förderung wahrnehmungsbeeinträchtigter Menschen.

Kinästhetik

Das Konzept der Kinästhetik in der Pflege befasst sich mit der Wahrnehmung sowie Analyse von Bewegungssituationen und verfolgt damit zwei wesentliche Ziele: Die Eigenbewegung des Pflegebedürftigen zu erkennen und damit zu unterstützen und zu fördern sowie dem Pflegenden eine erleichterte Pflgetätigkeit zu ermöglichen, die von gemeinsamen Bewegungen ausgeht. Der pflegebedürftige Mensch soll möglichst viele Bewegungen selbständig ausführen, worin er von der Pflegeperson aktiv unterstützt und gefördert wird.

Mikrolagerung

Es können zwei Formen der Mikrolagerung differenziert werden. Einerseits wird von Mikrolagerung gesprochen, wenn lediglich die Lage der Extremitäten leicht verändert wird. Andererseits wird auch die Unterlagerung bzw. Positionsveränderung von kleinen Kissen z. B. unter der Schulter, der Hüfte oder der Extremitäten als Mikrolagerung bezeichnet. Damit wird das Bewegungsmuster eines gesunden, liegenden Menschen nachgeahmt. Es werden kleine Schwerpunktverlagerungen erreicht, die den Auflagedruck verändern und die Körperwahrnehmung fördern. Die Mikrolagerung wird unterstützend eingesetzt um z. B. Dekubitus, Pneumonie, Thrombose und Kontrakturen zu vermeiden. Die Mikrolagerung ersetzt jedoch nicht die konventionelle Lagerung.

Bobath-Lagerung

Die Bobath-Lagerung zählt zu den Pflege- und Therapiekonzepten für Patienten mit Lähmungen, Störungen des Muskeltonus verursacht durch z. B. einen Schlaganfall, Hirnbluten oder andere Krankheiten des Zentralen-Nervensystems. Ziel ist es, den Patienten die mehr betroffene Körperseite bewusst zu machen, die Bewegungsfähigkeiten des Patienten zu aktivieren sowie z. B. einem Dekubitus und Kontrakturen vorzubeugen.

Für wen geeignet?

- Menschen mit Bewegungsbehinderungen bzw. -einschränkungen

- Menschen mit Bewegungsbehinderungen z. B. nach chirurgischen Eingriffen
- Menschen im Koma und Wachkoma
- Menschen mit Lähmungen

- Bewusstlose, desorientierte Menschen
- Menschen nach Schlaganfall mit Halbseitenlähmung
- Menschen mit M. Alzheimer
- Menschen im Koma/Wachkoma

- Alle Pflegenden und zu pflegenden Menschen

- Menschen mit Schlaganfall (Apoplex)
- Demenzerkrankungen
- Körperbildstörungen und -veränderungen
- Schmerzpatienten
- u.a.

- Menschen mit Schlaganfall (Apoplex)
- Menschen nach Hirnblutung
- ZNS-Störung
- Menschen mit Lähmungen

Wer ist Lück?

Lück entwickelt, produziert und liefert unter dem eigenständig geführten Marken- und Vertriebsdach „RHOMBO MEDICAL“® spezielle Kissen/Lagerungskissen, Einziehdecken, Matratzen, Auflagen und Bezüge für den medizinisch-pflegerischen Bereich wie Ausstattung von Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie für die Pflege zu Hause.

Wir sind für Sie da... RHOMBO-MEDICAL Service

Gratis anfordern unter info@rhombo-medical.de

Ihre Fragen beantworten wir gern.

- Poster „Wege der Positionierung“
- CD „Möglichkeiten optimalen Liegens“
- Broschüre „Wege der Positionierung“
- Mobilisierungsprotokoll
- Buchtipps: Wagner, U. (2012):
Positionierungen: Lagerungen und
Positionswechsel. München: Elsevier

Senden Sie uns eine E-mail unter: info@rhombo-medical.de
Auch Tipps und Anregungen nehmen wir gern entgegen.

www.rhombo-medical.de



Die Ruhe, die beweglich hält.®

R H O M B O
M E D I C A L

Die Ruhe, die beweglich hält.®

Speziell bei Menschen, die aufgrund einer Krankheit in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind, spielt die aktivierende Pflege eine besondere Rolle. RHOMBO-MEDICAL® Produkte wurden speziell für die aktivierende Pflege entwickelt und fördern, unterstützen und erhalten die Beweglichkeit, das Körperbewusstsein und die Körperwahrnehmung. Sie bieten: Die Ruhe, die beweglich hält.

W0090 - Stand 05.2018



Lück GmbH & Co.KG · Vennweg 22 · 46395 Bocholt
Tel. +49 (0)2871 / 99 79-0 · Fax +49 (0)2871 / 99 79-10
www.rhombo-medical.de · info@rhombomedical.de

*Nachdruck, Vervielfältigung sowie Veröffentlichung im Internet o.ä. Medien –
auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.*