


## WENDEMATRATZE **BI-Komfort**

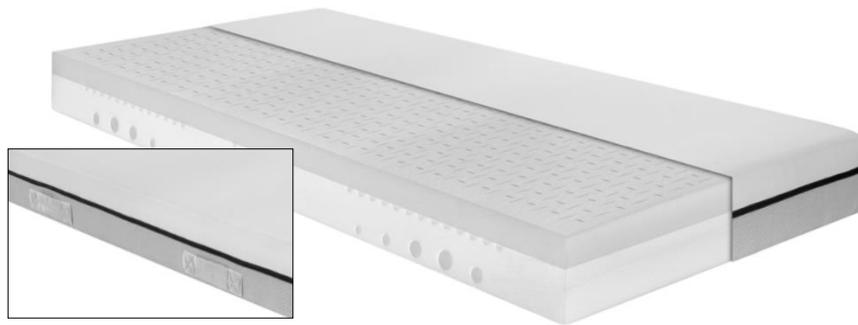

Die Wendematratze **BI-Komfort** besticht durch ihre Vielseitigkeit und einfache Anwendung. Zwei unterschiedliche Härtegrade an Ober- und Unterseite lassen keine Wünsche im Liegekomfort offen. Durch die beidseitig angebrachten Wendeschlaufen ist auch der Wechsel von der weichen zur festen Liegefläche schnell und einfach durchgeführt und somit optimal auch für den Reha, -Kur und Krankenhausbereich geeignet.

### Matratzenkonstruktion:

Material:	Hybrid PUR Schaum
Matratzenbasis:	11 cm 7-Zonen wellenförmiger Lammellenschnitt, RG 40
Liegefläche:	7 cm <b>HyTHERM</b> mit Klimastanzung, RG 40 mit Randzonenverstärkung
Bezug:	Oberseite 100% Polyester Strickware Unterseite 100 % Polyester im 3D Abstandgestrick 60°C waschbar
Format:	90x200x19 cm (weiter Größen auf Anfrage)

### Eigenschaften:

Zweifarbiger Polyesterbezug erleichtert durch sofortige Wahrnehmung den richtigen Einsatz der Matratze. Die weiche (helle) Matratzenseite sorgt mit der speziellen **HyTHERM** Klimastanzung für ein optimales Raumklima im Bett. Die festere (dunkle) Matratzenseite bietet mit dem 7-Zonen Lammellenschnitt eine optimale Druckverteilung und Entlastung sowie ein festeres Liegegefühl.

### Einsatzbereich:

**Als Wendematratze mit einer weichen und einer festen Liegefläche findet dieses Produkt gerade im institutionellen Bereich auf Grund ihrer Vielseitigkeit und einfachen Handhabung ihren Einsatz. Ideal auch als Reha- und Hotelmatratze.**