


## HYGIENEBEZUG Klintex

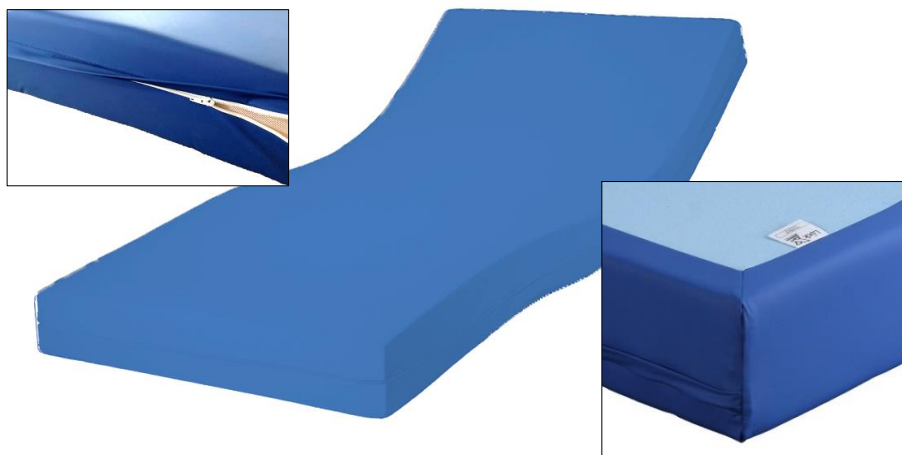

Der Hygienebezug **Klintex** verbindet die Vorteile eines Hygienebezuges mit denen eines Jerseybezuges. Auf der Oberseite, seitlich und 7 cm an der Unterseite überlappend (siehe kleines Bild oben rechts), besteht der **Klintex** Hygienebezug aus einem polyurethan-kaschiertem bi-elastischen und schwerentflammarem PES-Textil in den Farben blau oder grau (je nach Matratzentyp). Die Unterseite besteht aus einem hellblauen, 100 % Feinjersey mit Tragegriffen. Die mikrofeine atmungsaktive Beschichtung des Hygienematerials garantiert ein angenehmes Schlafklima und einen hohen Liegekomfort. Die Unterseite aus Jersey sorgt für den optimalen Feuchtigkeitsaustausch nach unten. Verdeckter Reißverschluss an 3 Seiten für leichtes Einziehen

- Hygienematerial schwer entflammbar - BS 7175 (1989)
- kochfest 95°C, tumblerfest 100°C
- chemisch reinigungsbeständig
- dampfsterilisierbar
- Oberseite beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel.

### Technische Daten Hygienematerial:

• Gewicht	ISO 3801/5 1977	ca. 185 g/m <sup>2</sup>
• Höchstzugkraft Kette	ISO 13934 1999	> 240 N/5 cm
• Höchstzugkraft Schuss	ISO 13934 1999	> 200 N/5 cm
• Weiterreissfestigkeit Kette	ISO 4874A1 1977	> 35 N
• Weiterreissfestigkeit Schuss	ISO 4874A1 1977	> 30 N
• Wasserdichtheit vor waschen	ISO 811 1981	ca. 2000 mm
• Wasserdichtheit nach waschen	ISO 811 1981	ca. 2000 mm
• Wasserdampfdurchlässigkeit		ca. 600 g/m <sup>2</sup> d
• Bakteriendicht	ATCC 6538	OK
• Schimmelbeständig	ATCC 9642	OK

**Entsorgung:** unbedenklich mit normalem Hausmüll