


ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE *Rhomb-Care*® Prevent Plus

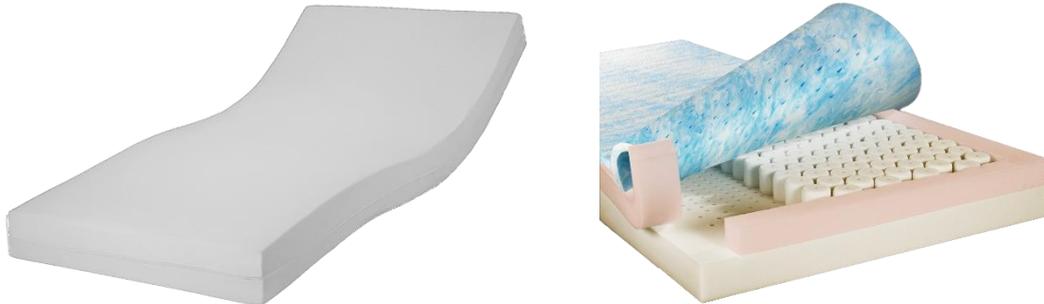

Die *Rhomb-Care*® **Prevent Plus** ist eine ergonomische **Superweichmatratze** mit sensitiven Flextubes für weiches Eintauchen, insbesondere bei niedrigem Körpergewicht. Durch die Rhombo-Therm®-Auflage ist diese Matratze sehr gut geeignet zur Dekubitusprophylaxe und –therapie und gewährleistet eine optimale Luftzirkulation und hervorragenden Wärmeaustausch.

Matratzenkonstruktion:

Material:	Hochwertiger Kaltschaum
Matratzenbasis:	7 cm mit ergonomischer Lochung, RG 45, Stauchhärte 4,5 kPa
Liegefläche:	6 cm hochelastische Flextubes, RG 80, Stauchhärte 2,5 kPa mit Randzonenverstärkung
	2 cm spezieller Rhombo-Therm®-Auflage für weiches Einsinken des Körpers und gute Belüftung, RG 40
Bezüge:	Kombinieren Sie die Matratze <i>Rhomb-Care</i> ® Prevent Plus mit drei verschiedenen Matratzenbezügen.
Format:	90x200x15 cm (weiter Größen auf Anfrage)
Dauerhaltbarkeit:	nach LGA 100 von 100 Punkten

Eigenschaften:

Bewegliche Zylinder fördern die Körperwahrnehmung und unterstützen die aktiven Bewegungen.
Höchste Druckreduzierung auch bei geringem bis mittlerem Körpergewicht.
Progressiver Aufbau unterstützt auch das Durchführen von passiven Bewegungen
Randzonenverstärkung erleichtert sicheres Aufstehen und Mobilisieren.
Hervorragende mikroklimatische Eigenschaften bedingen Wohlbefinden.

Einsatzbereich:

Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei allen Dekubitus-therapien (Stadium I bis IV) ihren Beitrag.
Auch bei schmerzhaften Erkrankungen des Bewegungsapparates:
Osteoporose, rheumatischen Schmerzzuständen uvm.
(empfohlen bis BMI 35)

ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE *Rhomb-Care*® **Prevent Plus**




RC® Prevent Plus mit Semy-Plus Bezug

Farbe: hellgrau

Rundum:

polyurethan-kaschiertes PES-Textil
längs- und querelastisch
wasserdicht, bakteriendicht
schwer entflammbar

waschbar bis 95°C

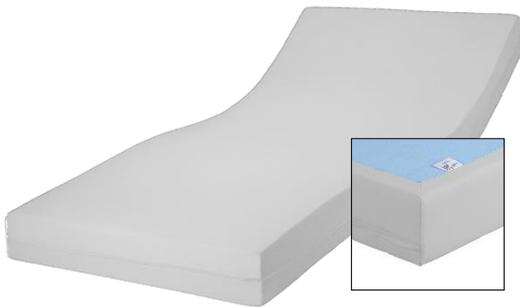

RC® Prevent Plus mit Klintex Bezug

Farbe: hellgrau/blau

Oberseite und seitlich:

polyurethan-kaschiertes PES-Textil
längs- und querelastisch
wasserdicht, bakteriendicht
schwer entflammbar

Unterseite:

100% Feinjersey mit Tragegriffen
waschbar bis 95°C



RC® Prevent Plus mit Semy-Plus EVA Bezug

Farbe: hellgrau/schwarz

Oberseite und seitlich:

polyurethan-kaschiertes PES-Textil
längs- und querelastisch
wasserdicht, bakteriendicht
schwer entflammbar

Unterseite:

100% Polyester
Gurtbänder mit Klettverschluss
Griffschlaufen zur Evakuierung
waschbar bis 95°C