


ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE Visco-Soft

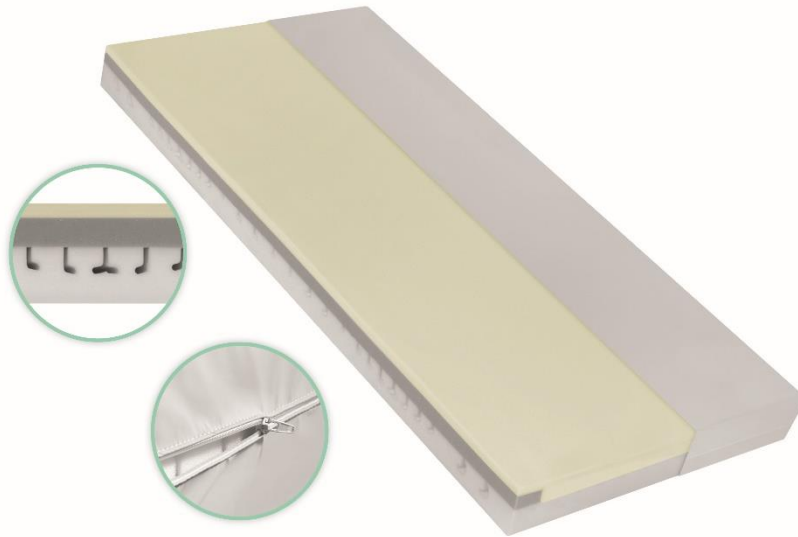

Die Oberseite sorgt durch die 6 cm hohe Schicht aus viskoelastischem Schaum für eine perfekte Druckentlastung und nimmt die Körperkontur optimal auf. Durch die 7-Zonen Bohrung in der Unterseite werden ausgeprägte Körperpartien wie Schulter und Gesäß druckentlastend aufgenommen und optimal belüftet. Der verstärkte Seitenrand erleichtert das Aufstehen.

Matratzenkonstruktion:

Material:	PUR Kaltschaum/Viskoelastischer Schaumstoff
Matratzenbasis:	8 cm 7-Zonen Rhombo-Flex Bohrung PU-Kaltschaum, RG 50, Stauchhärte 4,0 kPa
Liegefläche:	6 cm viskoelastischer Schaumstoff, RG 50, Eindruckhärte 60 N mit integrierter 7 cm breiter Seitenrandverstärkung aus PU Kaltschaum, RG 40, Stauchhärte 5,0kPa
Bezug:	Ringsum-Hygienebezug SEMY-PLUS, silbergrau Kochfest 95°C, tumblerfest 100°C, 3-seitiger Reißverschluss. Beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel. Schwerentflammbar Crib 5, OEKO-TEX® Standard 100 Klasse 2
Format:	90x200x14 cm (weiter Größen auf Anfrage)

Einsatzbereich:

Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei allen Dekubitustherapien (Stadium I bis IV) ihren Beitrag.