

ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE *Rhombo-Care®* Prevent Plus



Die Oberseite der Rhombo-Care® Prevent Plus besteht aus hypersoftem Sky-therm® Schaumstoff für eine optimale Körperanpassung. Die angewandte patentierte Rhombo-therm® Stanzung fördert die Punktelastizität sowie Druckverteilung durch das Lösen der Oberflächenspannung. Die mittlere Zone des Matratzenkerns ist aus sensitiven Flextubes für eine superweiche Aufnahme bei gleichzeitig hoher Körperunterstützung hergestellt. Sensitive Flextubes in Kombination mit der Rhombo-therm® Abdeckung verbessern das Mikroklima um ein Vielfaches. Die angebrachte Seitenrandverstärkung gibt Sicherheit in der sitzenden Position und erleichtert das Aufstehen. Die Matratzenbasis ist mit einer 7-Zonen-Rasterbohrung versehen und besteht aus hochwertigem HR-Schaum. Die Matratze bietet ein hervorragendes Mikroklima aufgrund der Kombination von Rhombo-therm®, Sensitiven Flextubes und Rasterbohrung, die eine vertikale Ableitung von Wärme und Feuchtigkeit ermöglicht

Matratzenkonstruktion:

Material:	Hochwertiger Kaltschaum
Matratzenbasis:	7-Zonen Rhombo-flex® (RG55)
Mittelschicht:	Sensitive Flextubes (RG80 / 6 cm Durchmesser)
Liegefläche:	Sky-therm® mit Rhombo-therm® Stanzung mit Randzonenverstärkung RG 40 kg/m ³ 2 cm spezieller Rhombo-Therm®-Auflage für weiches Einsinken des Körpers und gute Belüftung, RG 40
Bezüge:	Kombinieren Sie die Matratze <i>Rhombo-Care®</i> Prevent Plus mit dem Matratzenbezug Semy Plus oder dem Matratzenbezug Semy Plus EVA
Format:	90x200x15 cm (weiter Größen auf Anfrage)

Eigenschaften:

Die Weichlagerungsmatratze Rhombo-Care® Prevent Plus bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei Dekubitus Therapien bis Stadium 4 (EPUAP / Seiler) ihren Beitrag

Einsatzbereich:

belastbar bis 150 kg, empfohlen 20 - 130 kg

ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE *Rhomb-Care®* Prevent Plus




RC® Prevent Plus mit Semy-Plus Bezug

Farbe: hellgrau

Rundum:

polyurethan-kaschiertes PES-Textil
längs- und querelastisch
wasserdicht, bakteriendicht
schwer entflammbar

waschbar bis 95°C

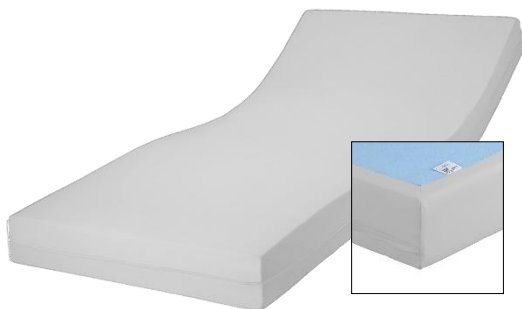

RC® Prevent Plus mit Klintex Bezug

Farbe: hellgrau/blau

Oberseite und seitlich:

polyurethan-kaschiertes PES-Textil
längs- und querelastisch
wasserdicht, bakteriendicht
schwer entflammbar

Unterseite:

100% Feinjersey mit Tragegriffen

waschbar bis 95°C



RC® Prevent Plus mit Semy-Plus EVA Bezug

Farbe: hellgrau/schwarz

Oberseite und seitlich:

polyurethan-kaschiertes PES-Textil
längs- und querelastisch
wasserdicht, bakteriendicht
schwer entflammbar

Unterseite:

100% Polyester
Gurtbänder mit Klettverschluss
Griffschlaufen zur Evakuierung

waschbar bis 95°C