

**R H O M B O
M E D I C A L**

Die Ruhe, die beweglich hält.®

„Gesundes, bequemes
Liegen ist ein wichtiger
Bestandteil des
Heilungsprozesses.“



RHOMBO-CARE® MATRATZEN

**mit optimaler Balance von
Druckverteilung & Körperunterstützung**



Die Ruhe, die beweglich hält.®

RHOMBO-MEDICAL® ist die Marke hochwertiger Medizinprodukte rund um die Themen gesundes Liegen, Lagern und Sitzen.

Die Entwicklung der **RHOMBO-MEDICAL® Produkte** basiert auf fundierten Erkenntnissen und Erfahrung der professionellen Pflege. Speziell das Konzept der Aktivierung in der Altenpflege findet sich in den Produkten wieder und trägt dazu bei, dass Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes, aktives Leben führen.

RHOMBO-MEDICAL® Produkte bewähren sich seit Jahrzehnten im Bereich der prophylaktischen und/oder therapeutischen Anwendungen in Kliniken, Pflegeheimen, Rehabilitationseinrichtungen und in der häuslichen Krankenpflege.

Vertrauen auch Sie den professionellen **RHOMBO-MEDICAL®-Produkten** und erleben Sie „Die Ruhe, die beweglich hält“.



CE-KENNZEICHEN Medizinprodukte

Die Kennzeichnung dokumentiert, dass Waren den hohen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gem. MDR 2017/745 der Europäischen Union entsprechen und steht für zuverlässige Produktsicherheit.



OEKO-TEX Standard 100

Geprüft nach Öko-Tex Standard 100 bedeutet, dass das Produkt auf eine Reihe von insgesamt 100 Schadstoffen, optische Aufheller oder ähnliches getestet wurde. Die Prüfkriterien sind weltweit einheitlich.

Unser Engagement Qualitäts- und Umweltmanagement

**R H O M B O
M E D I C A L**

Die Ruhe, die beweglich hält.®

QM/UM System Zertifizierungen



Wir übernehmen Verantwortung

Ein bewusster und umweltschonender Umgang mit Ressourcen war schon immer ein wichtiges Thema für die Lück GmbH & Co. KG als Hersteller von RHOMBO-MEDICAL® Produkten. Die Weichen dafür wurden bereits Anfang der 1990er Jahre gestellt, als das Unternehmen Lück als eines der ersten Unternehmen der Branche ein zertifiziertes Qualitäts- und Umweltmanagement einführte.

Lück ist seitdem Qualitäts- und Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 sowie DIN ISO 14001 und beweist damit sein aktives Engagement für Umwelt und Natur.



Qualitätsmanagement – DIN ISO 9001

Die DIN EN ISO 9001 ist eine Norm aus der Gesamtreihe DIN EN ISO 9000 ff. Sie ist ein weltweit anerkannter Standard, der Anforderungen an ein wirksames Qualitätsmanagement in einem Unternehmen definiert.




Umweltmanagement – DIN ISO 14001

Die ISO 14001 gilt als international anerkannte Norm für Umwelt-Managementsysteme. Um Unternehmen die Anwendung eines weltweit einheitlichen Standards zu ermöglichen, wurde die ISO 14001 geschaffen.

Ziel der DIN ISO 14001 ist es, den Umweltschutz im Betrieb auf einem umweltverträglichen Stand zu halten und kontinuierlich zu steigern.

Zur Entlastung Matratzen & Auflagen

RHOMBO-MEDICAL® bietet professionelle
Produkte zur Dekubitusintervention

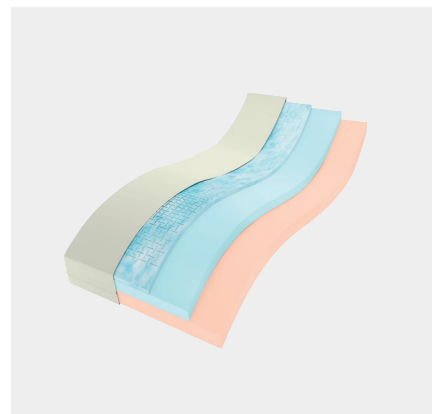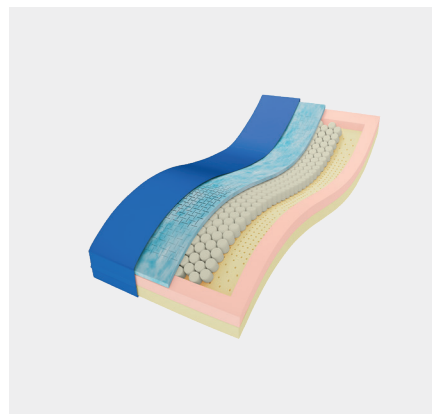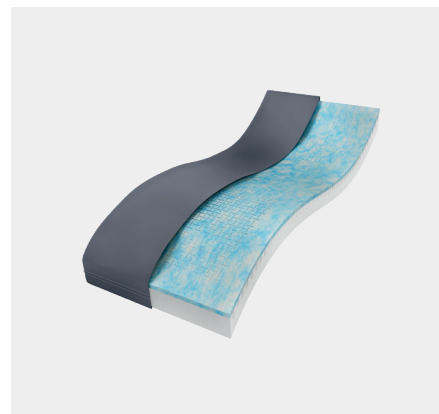

RHOMBO MEDICAL

Die Ruhe, die beweglich hält.®

Ideal im Pflegealltag

Dekubitusintervention
Dekubitusprophylaxe
Dekubitustherapie

RHOMBO-MEDICAL® bietet professionelle Pflegebettmatratzen, Spezialmatratzen und Auflagen für den medizinischen und therapeutischen Bereich, die in Krankenhäusern, Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen, Altenpflegeheimen und sonstigen therapeutischen Einrichtungen zum Einsatz kommen. Ihre Herstellung basiert fast immer auf eigenen patentierten Verfahren der Schaumverarbeitung, die Komfort und Langlebigkeit der Matratzen sicherstellen.

RHOMBO-MEDICAL® bietet zahlreiche Matratzen und Auflagen zur Dekubitusintervention. Das Angebot reicht von soliden Pflegebettmatratzen mit hohen Komforteigenschaften, über Matratzen für Schwergewichtige bis hin zu Weichlagerungs- bzw. Anti-Dekubitusmatratzen.




Die patentierte Verarbeitungstechniken:

Sensitive Flextubes, Rhombo-therm® und Rhombo-flex®

Matratzen mit sensitiven Flextubes sind intensiv punktelastisch und zur Weichlagerung konzipiert.
Matratzen mit Rhombo-therm® sind Garant für Punktelastizität, Langlebigkeit und gesundes Bettklima.
Matratzen mit Rhombo-flex® überzeugen als solide und robuste Pflegebettmatratzen.

Unser Patent Rhombio-therm® für Matratzen

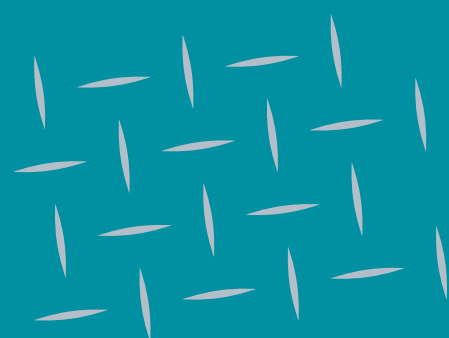

Rhombio-therm® ist eine spezielle, patentierte Stanztechnik für Polyurethanschäume. Diese erhöht nachweislich die Anpassungsfähigkeit und damit die Punktelastizität des Schaums, so dass er sich weich modellierend an Körperkonturen anschmiegt.


Rhombio-therm® verleiht Schäumen eine ungewöhnlich gute Druckverteilung und verbessert gleichzeitig die Durchlüftung. Der Wärmeaustausch und der Feuchtigkeitsausgleich erfolgt außerdem abgestimmt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Körperzone, d.h. wärmere Körperzonen werden intensiver belüftet als weniger warme Zonen. Das ist einzigartig und sichert ein gesundes trockenes Mikroklima zum Wohlfühlen.

Zusätzlich wirkt die Stanzung der Bildung von Sitz- und Liegekuhlen vor und erhöht damit die Lebensdauer.


PUNKTELASTIZITÄT IM VERGLEICH:

Die Rhombio-therm®-Stanzung löst die Oberflächenspannung auf und ist dadurch enorm punktelastisch, druckentlastend und anpassungsfähig.

Herkömmlicher Schaum zeigt sog. "Hängematten-Effekt", führt zu partiellen Druckbelastungen und erhöht die Scherkräfte.

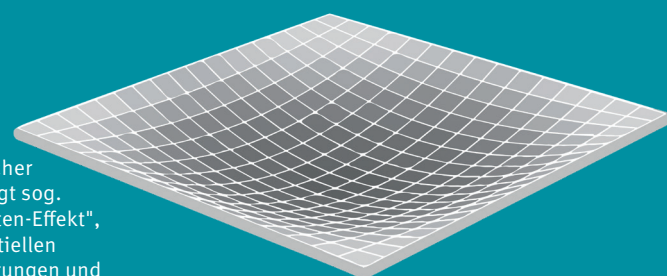

Schaum mit Rhombio-therm® Stanzung erhöht die Punktelastizität, bewirkt perfekte Druckverteilung und reduziert gleichzeitig die Scherkräfte.

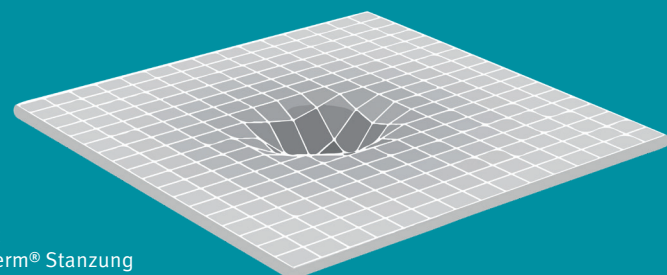

Pflegerelevante Informationen


- Rhombio-therm® erhöht die Langlebigkeit von Matratzen
- bewirkt perfekte Druckverteilung
- fördert gutes Mikroklima
- reduziert Scherkräfte



Sky-therm® Schaum mit Rhombio-therm® Stanzung


PERFEKTE DRUCKVERTEILUNG OPTIMALES MIKROKLIMA

Die Einschnitte der Rhombio-therm®-Stanzung öffnen und schließen sich bei jeder Bewegung und sorgen so für eine perfekte Durchlüftung und unterstützen ein gesundes Bettklima

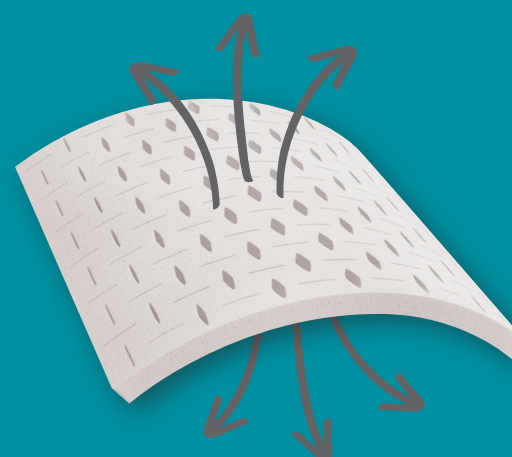


An schwereren Körperpartien entwickelt sich mehr Wärme als an anderen. Bei Rhombio-therm® weiten sich die Stanzungen mit zunehmender Druckbelastung und sorgen für einen intensiveren Wärmeaustausch als an weniger belasteten Stellen.

Die Rhombio-therm®-Auflage reduziert den Auflagedruck des Körpers durch eine ausgezeichnete flächige Druckverteilung. Die Haut bleibt gut durchblutet, weil kein zu hoher Druck auf sie einwirkt. Der Kontakt zwischen der Oberfläche und dem aufliegenden Körper ist absolut bündig, sodass ein permanenter Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch stattfinden kann, Kältebrücken treten nicht auf.

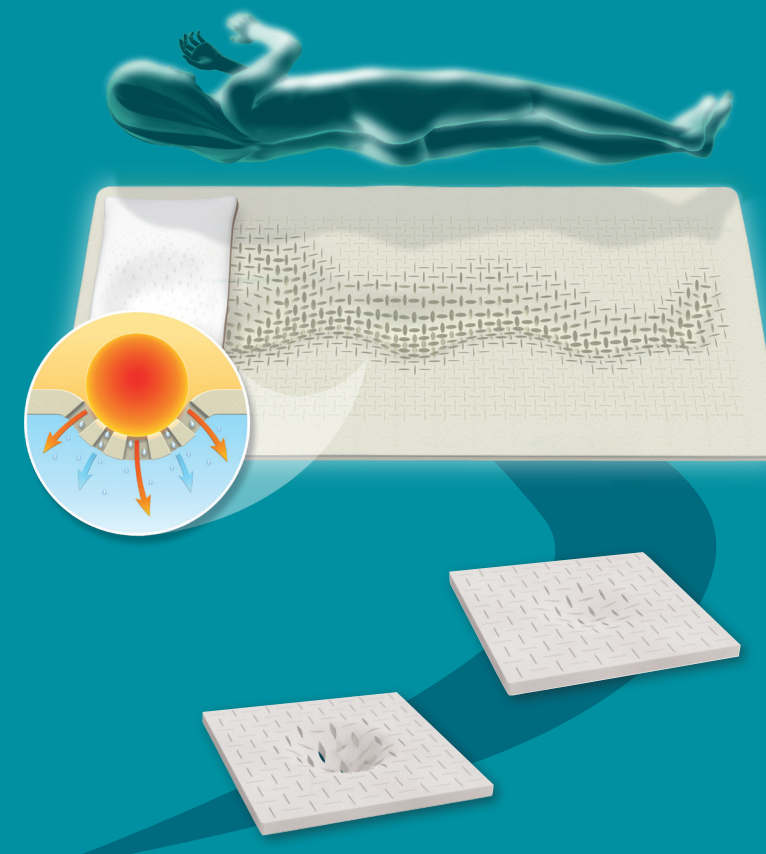

Die Dekubitusprophylaxe & -Therapie* **Rhombio-Care®** **Prevent Plus**

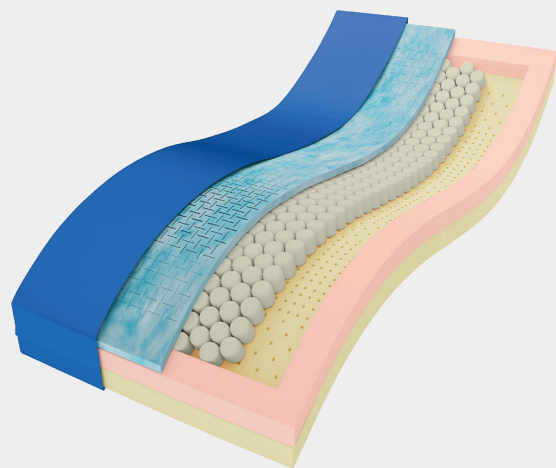

Die Oberseite der Rhombio-Care® Prevent Plus besteht aus hypersoftem Sky-therm® Schaumstoff für eine optimale Körperanpassung. Die angewandte patentierte Rhombo-therm® Stanzung fördert die Punktelastizität sowie Druckverteilung durch das Lösen der Oberflächenspannung. Die mittlere Zone des Matratzenkerns ist aus sensitiven Flextubes für eine superweiche Aufnahme bei gleichzeitig hoher Körperunterstützung hergestellt. Sensitive Flextubes in Kombination mit der Rhombo-therm® Abdeckung verbessern das Mikroklima um ein Vielfaches. Die angebrachte Seitenrandverstärkung gibt Sicherheit in der sitzenden Position und erleichtert das Aufstehen. Die Matratzenbasis ist mit einer 7-Zonen-Rasterbohrung versehen und besteht aus hochwertigem HR-Schaum. Die Matratze bietet ein hervorragendes Mikroklima aufgrund der Kombination von Rhombo-therm®, Sensitiven Flextubes und Rasterbohrung, die eine vertikale Ableitung von Wärme und Feuchtigkeit ermöglicht.

Pflegerelevante Informationen

- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapie*
- hervorragende druckentlastende Eigenschaften
 - reduziert Scherkräfte
 - optimales Mikroklima
- für schmerzempfindliche Patienten empfohlen
- empfohlenes Patientengewicht 20-130kg



Größe in cm	Art.Nr. inkl. PU-Bezug Semy Plus Farbe: blau	Art.Nr. inkl. PU-Bezug Semy Plus EVA Farbe: blau-schwarz	Hilfsmittelnr.
90 x 200 x 15	19.748	19.248	11.29.05.0017
100 x 200 x 15	19.751	19.251	11.29.05.0017

Sondergrößen auf Anfrage



* Die Weichlagerungsmatratze Rhombio-Care® Prevent Plus bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei Dekubitustherapien bis Stadium 4 (EPUAP / Seiler) ihren Beitrag.


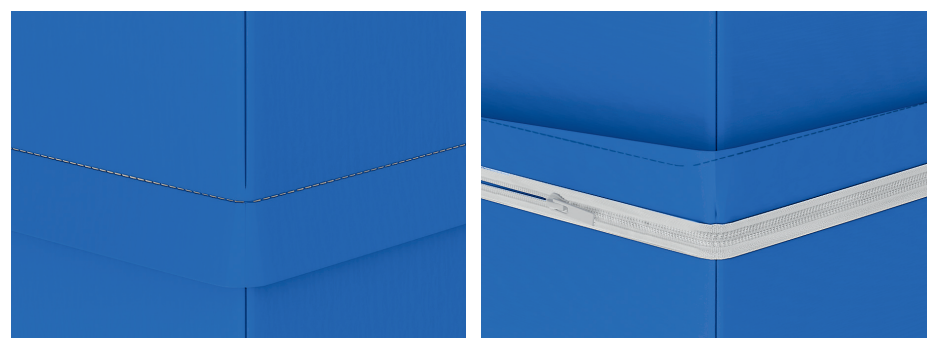


Bild links:
Matratzenbezug Semy Plus
mit 3-seitigem, verdecktem
Reißverschluss (überlappend)


Eigenschaften des Matratzenbezuges



Schema des progressiven Kernaufbaus:

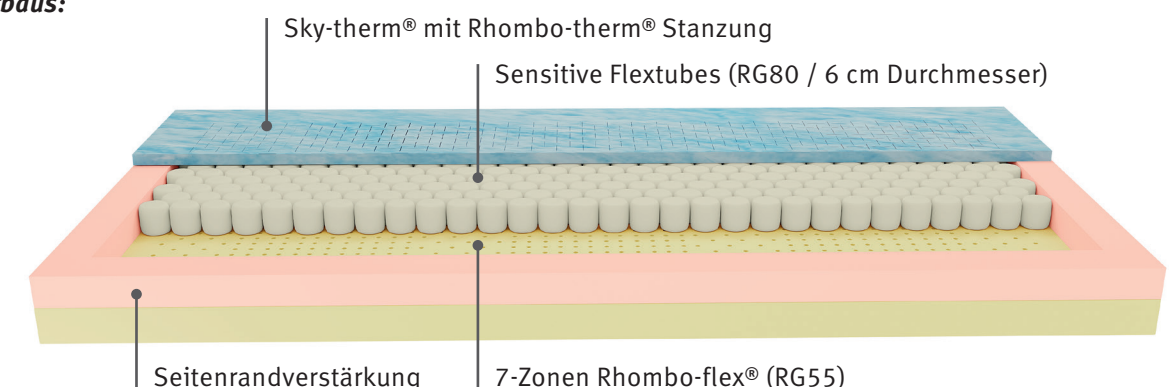

Die Dekubitusprophylaxe & -Therapie* **Rhombo-Care®** **Vitaflex Plus**

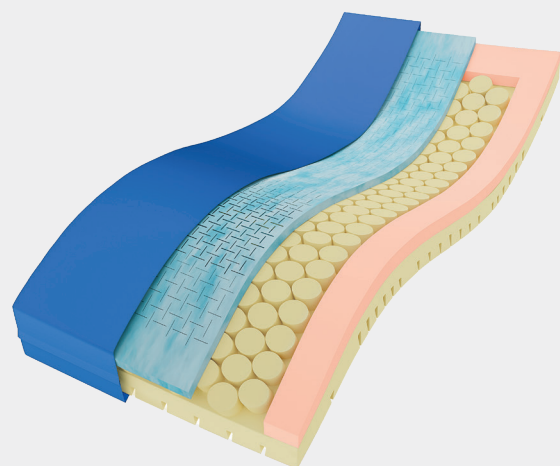

Die Oberseite der Rhombo-Care® Vitaflex Plus besteht aus hypersoftem Sky-therm® Schaumstoff für eine optimale Körperanpassung. Die angewandte patentierte Rhombo-therm® Stanzung fördert die Punktelastizität sowie Druckverteilung durch das Lösen der Oberflächenspannung.

Die mittlere Zone des Matratzenkerns ist aus dynamischen Flextubes gefertigt, welche hochflexibel Körperbewegungen unterstützen. Zudem verbessern diese in Kombination mit der Rhombo-therm® Abdeckung das Mikroklima. Die angebrachte Seitenrandverstärkung gibt Sicherheit in der sitzenden Position und erleichtert das Aufstehen.

Die untere Matratzenbasis verfügt über eine 7-Zonen Schnitttechnik an der Unterseite. Damit passt sich die Matratze sehr flexibel an verstellbaren Betten an.

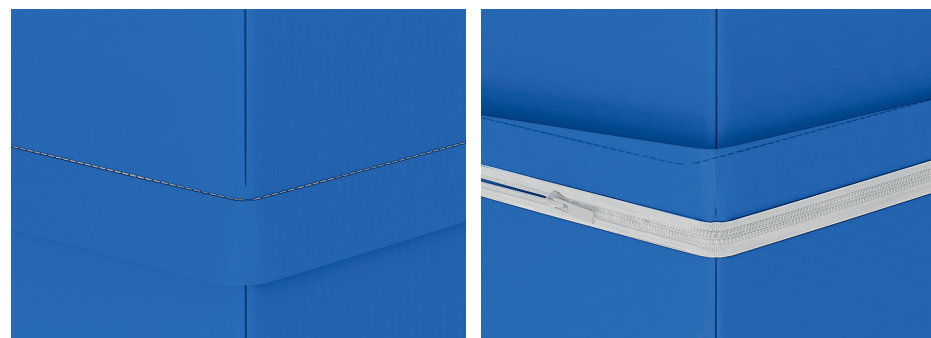


Bild links:
Matratzenbezug Semy Plus
mit 3-seitigem, verdecktem
Reißverschluss (überlappend)

Eigenschaften des Matratzenbezuges



Pflegerelevante Informationen


- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapie*
 - optimale druckentlastende Eigenschaften
 - reduziert Scherkräfte
 - optimales Mikroklima
- für schmerzempfindliche Patienten empfohlen
- empfohlenes Patientengewicht 20-140kg



HÖHE 15 cm	BELASTBAR 160 KG	DIN 597 (1+2) SCHWER ENTLAMMBAR	MEDIZIN-PRODUKT Klasse 1 nach MDR 2017/745	GARANTIE 5 JAHRE		OEKO TEX® STANDARD 100 A20-1001 Hohenstein HTTI
----------------------	----------------------------	---	---	----------------------------	--	---


Größe in cm	Art.Nr. inkl. PU-Bezug Semy Plus Farbe: blau	Art.Nr. inkl. PU-Bezug Semy Plus EVA Farbe: blau-schwarz	Hilfsmittelnr.
90 x 200 x 15	35.748	35.248	11.29.05.0019
100 x 200 x 15	35.751	35.251	11.29.05.0019

Sondergrößen auf Anfrage

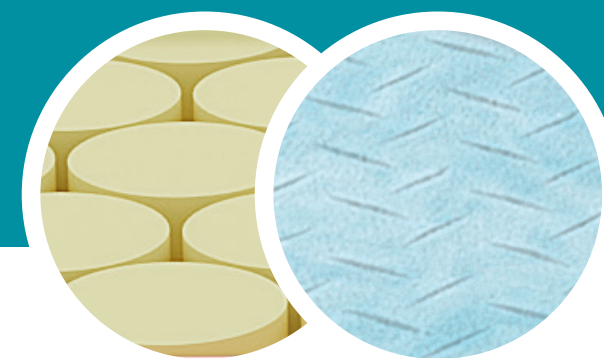


* Die Weichlagerungsmatratze Rhombo-Care® Vitaflex Plus bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei Dekubitustherapien bis Stadium 4 (EPUAP / Seiler) ihren Beitrag.

Schema des progressiven Kernaufbaus:

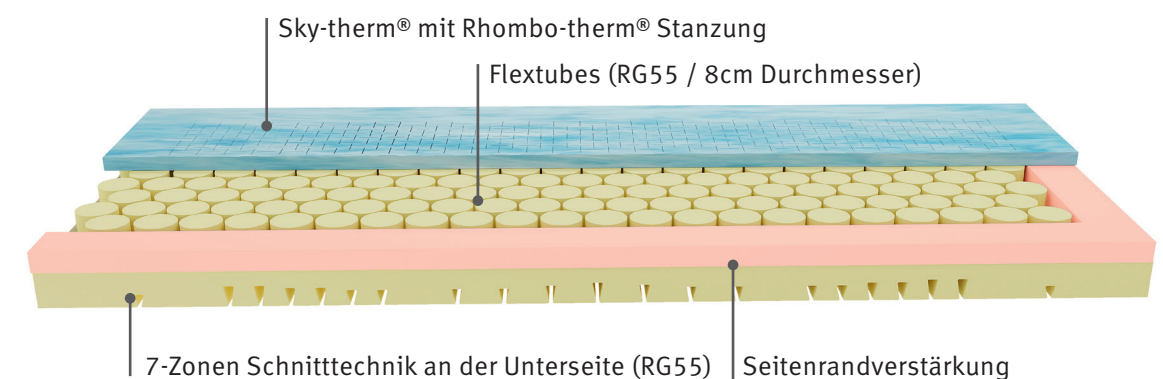

Die Dekubitusprophylaxe & -Therapie* **Rhomb-Care®** **Therm Plus**

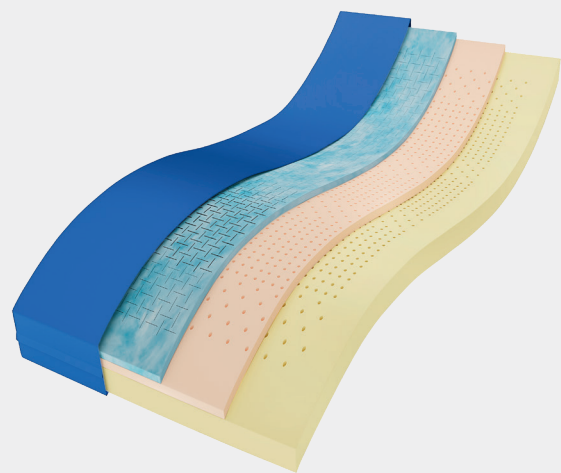

Die Oberseite der dreischichtigen Rhomb-Care® Therm Plus Matratze besteht aus hypersoftem Sky-therm® Schaumstoff für eine optimal weiche Körperanpassung. Die angewandte patentierte Rhombo-therm® Stanzung fördert die Punktelastizität sowie die Druckverteilung durch das Lösen der Oberflächenspannung.

Mittel- und Unterplatte sind aus hochwertigem HR-Schaumstoff mit verstärktem Seitenrand hergestellt. Beide Kernschichten verfügen über unterschiedliche, auf die Körperzonen abgestimmte 7-Zonen-Rasterbohrungen. Die Matratze gewinnt dadurch an Elastizität und passt sich noch besser an die Körperkontur an. Vertikale Rasterbohrungen ermöglichen eine erhöhte Luftzirkulation zur Ableitung von Wärme und Feuchtigkeit ohne die Stabilität der Matratze zu beeinträchtigen. Zudem verstärkt sie in Kombination mit der Rhombo-therm® Oberfläche das gesunde, trockene Mikroklima.

Pflegerelevante Informationen

- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapie*
 - positive druckentlastende Eigenschaften
 - reduziert Scherkräfte
 - optimales Mikroklima
- für schmerzempfindliche Patienten empfohlen
- empfohlenes Patientengewicht 20-140 kg



Größe in cm	Art.Nr. inkl. PU-Bezug Semy Plus Farbe: blau	Art.Nr. inkl. PU-Bezug Semy Plus EVA Farbe: blau-schwarz
90 x 200 x 14	26.748	26.248
100 x 200 x 14	26.751	26.251

Sondergrößen auf Anfrage

Optional mit höherem Basiskern erhältlich
für Patienten bis 200 kg Körpergewicht



* Die Weichlagerungsmatratze Rhomb-Care® Therm Plus bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei Dekubitustherapien bis Stadium 4 (EPUAP / Seiler) ihren Beitrag.

Schema des progressiven Kernaufbaus:


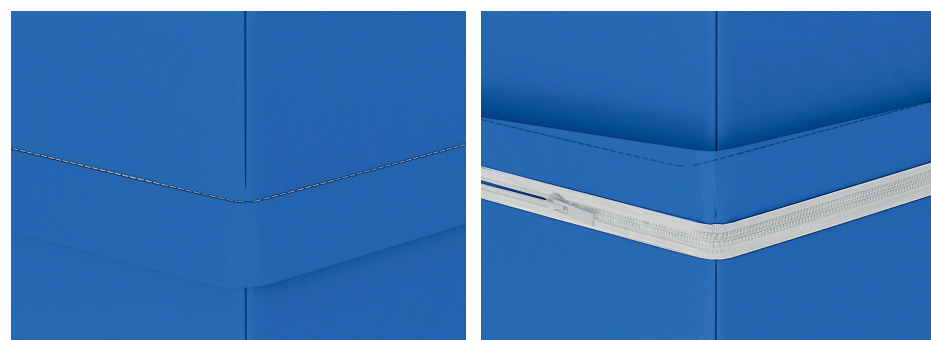


Bild links:
Matratzenbezug Semy Plus
mit 3-seitigem, verdecktem
Reißverschluss (überlappend)


Eigenschaften des Matratzenbezuges

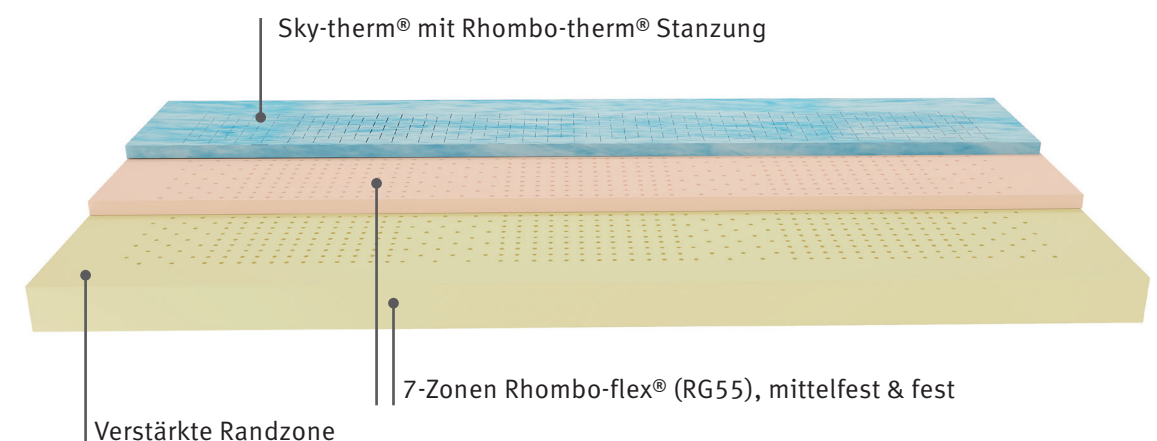

Die Dekubitusprophylaxe & -Therapie* Rhomb-Care® Therm Evo

Pflegerelevante Informationen

- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapie*
- druckentlastende Eigenschaften
- reduziert Scherkräfte
- gutes Mikroklima
- empfohlenes Patientengewicht 20-130kg

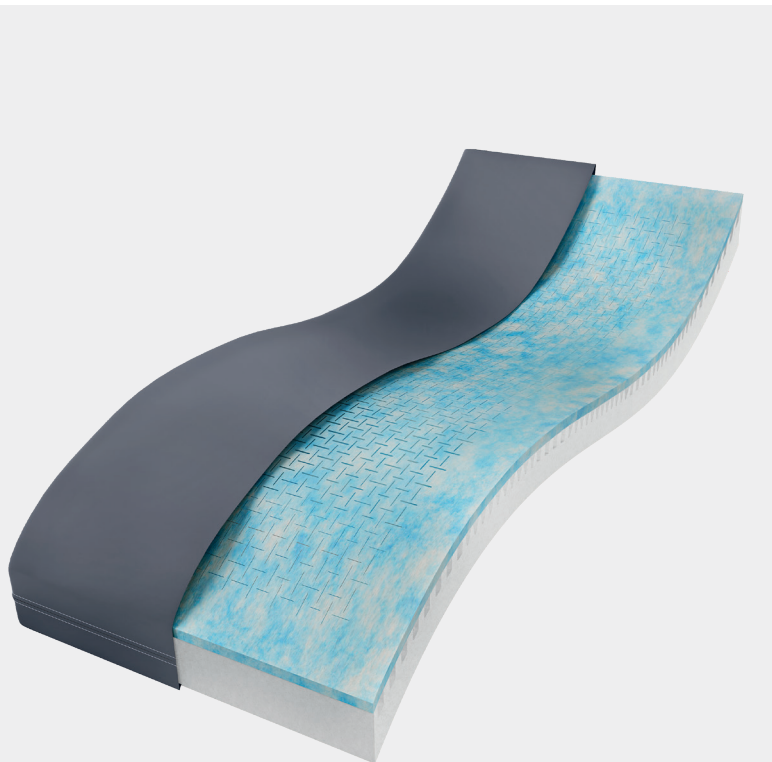

Oberseite der Rhomb-Care® Therm Evo Matratze ist aus hypersoftem Sky-therm® Schaumstoff gefertigt und sorgt für eine optimal weiche Körperanpassung. Die patentierte Rhombo-therm® Stanzung fördert die Punktelastizität und Druckverteilung durch das Lösen der Oberflächenspannung. Rhombo-therm® sorgt für ein gesundes Mikroklima aufgrund der guten Durchlüftungsmöglichkeit.


Die Matratzenbasis der Rhomb-Care® Therm Evo Matratze besteht aus einem Schaumstoffkern mit einem wellen-förmigen 7-Zonen-Lamellenschnitt. Der Kern fördert im Bereich der Lamellen die körperzonengerechte Aufnahme der Körperkontur und leitet progressiv zum festeren Matratzenbereich über, der dem Körper die notwendige Unterstützung bietet.

Der offene Aufbau der Matratze fördert zudem das Mikroklima innerhalb der Matratze.



Größe in cm	Art.Nr. inkl. PU-Bezug Semy light Farbe: grau	Art.Nr. inkl. PU-Bezug Semy Plus EVA Farbe: blau-schwarz	Hilfsmittelnr.
90 x 190 x 14	29.863	-	11.29.05.1047
90 x 200 x 14	29.848	29.248	11.29.05.1047
100 x 200 x 14	29.851	29.251	11.29.05.1047
120 x 200 x 14	29.852	-	11.29.05.1047
140 x 200 x 14	29.864	-	11.29.05.1047

Sondergrößen auf Anfrage

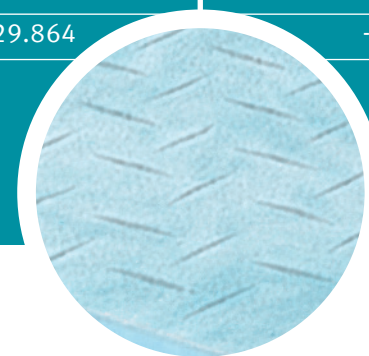

* Die Weichlagerungsmatratze Rhomb-Care® Therm Evo bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei Dekubitustherapien bis Stadium 4 (EPUAP / Seiler) ihren Beitrag.

Schema des progressiven Kernaufbaus:


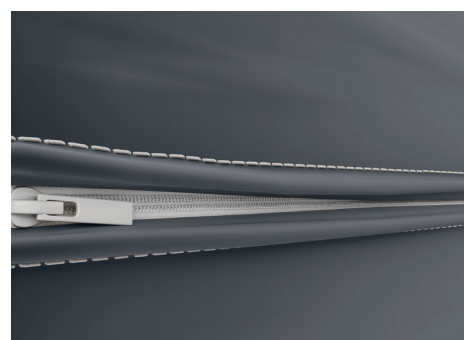


Bild links:

Matratzenbezug Semy light mit 3-seitigem, geschütztem Reißverschluss (Doppellippe)


Eigenschaften des Matratzenbezuges

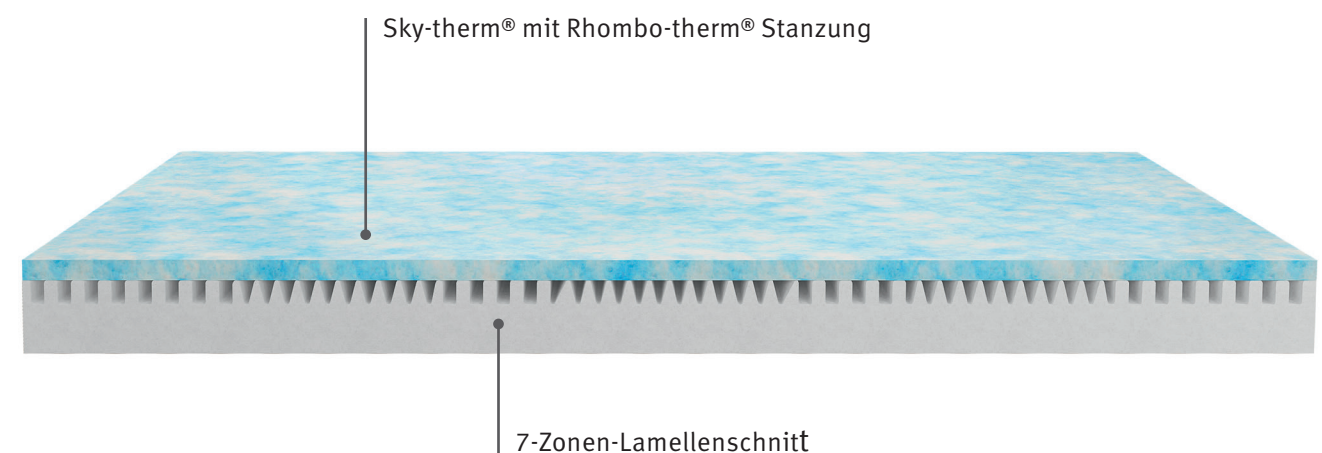

Die Schwerlastmatratze **Rhomb-Care®** **Heavy Therm**

Pflegerelevante Informationen

- optimal für Menschen mit erhöhten Körpergewicht
- unterstützt die Dekubitusprophylaxe
- angenehmes Mikroklima
- empfohlenes Patientengewicht 140-240 kg

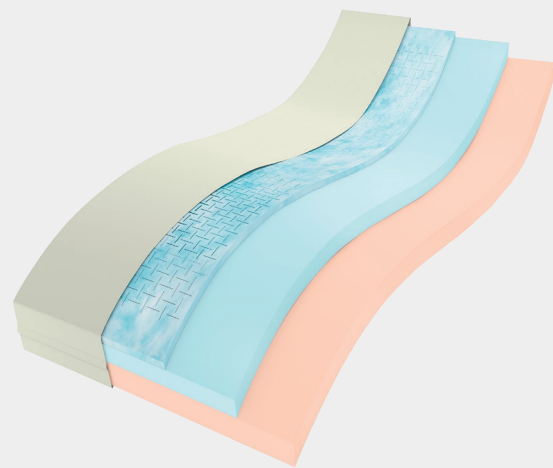

Die Rhomb-Care® Heavy Therm Matratze ist ein effektiver Beitrag zur Optimierung des Schlafkomforts für Menschen mit erhöhtem Körpergewicht bis 240 kg.

Die Kernoberseite ist aus hypersoftem Sky-therm® Schaumstoff für eine optimale Körperanpassung. Die angewandte patentierte Rhomb-therm® Stanzung fördert die Punktelastizität sowie Druckverteilung durch das Lösen der Oberflächenspannung und sorgt für ein gesundes Mikroklima bedingt durch die gute Durchlüftungsmöglichkeit.

Die mittlere Ebene des Matratzenkerns besteht aus einem festen Schaum mit besonders hoher Tragkraft. Darunter schließt sich ein weiterer sehr kompakter Schaum mit höherer Festigkeit an, der für die höchste Stützkraft innerhalb des Kernsystems sorgt und die Mobilität unterstützt.




Größe in cm	Art.Nr. inkl. PU-Bezug Semy Plus Farbe: silbergrau
90 x 200 x 18	27.748
100 x 200 x 18	27.751
120 x 200 x 18	27.752

Sondergrößen auf Anfrage




Bild links:
Matratzenbezug Semy Plus
mit 3-seitigem, verdecktem
Reißverschluss (überlappend)

Eigenschaften des Matratzenbezuges

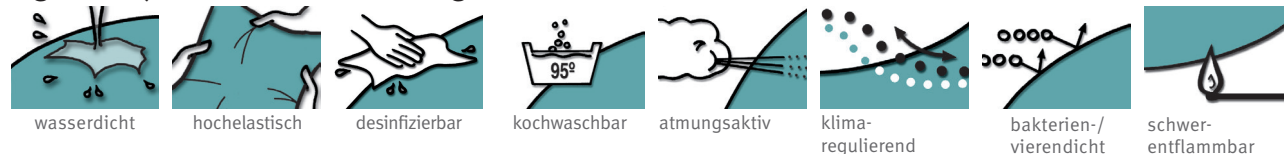

Schema des Kernaufbaus:

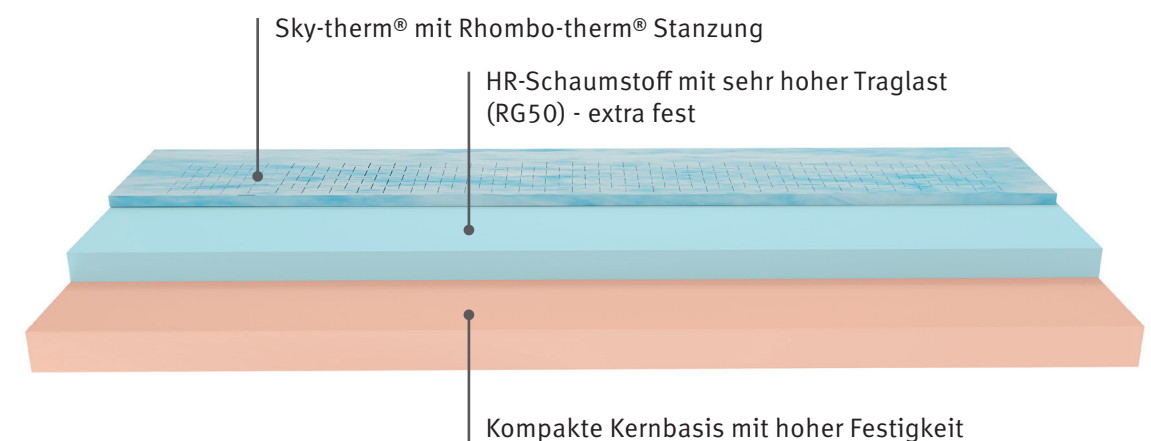



Die Anti-Dekubitus-Bettauflage **Rhombo-Care®** Therm Plus Auflage

Pflegerelevante Informationen

- geeignet zur Dekubitusprophylaxe und -therapie
- druckentlastende Eigenschaften
- reduziert Scherkräfte
- gutes Mikroklima
- für schmerzempfindliche Patienten empfohlen



Die Rhombo-Care® Anti-Dekubitus-Bettauflage aus hypersoftem und hochpunktelastischem Sky-therm® Schaumstoff reduziert deutlich den Auflagedruck des Körpers durch eine flächige Druckverteilung, sodass die Haut gut durchblutet bleibt.

Der Kontakt zwischen Oberfläche und Körper ist absolut bündig, dennoch kann ein permanenter Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch stattfinden, Kältebrücken treten nicht auf.

Die Betauflage dient zur Weichlagerung und ist auch empfehlenswert für druckschmerzempfindliche Menschen.

Die Betauflage ist mit dem abnehmbaren Hygienebezug Rhombo-Care® Semy Plus ausgestattet und zusätzlich mit Eckgummis versehen, die die Auflage auf der Matratze sichern.



Größe in cm	Art.Nr. inkl. PU-Bezug Semy Plus Farbe: blau
90 x 200 x 7	79.148
100 x 200 x 7	79.151

Sondergrößen auf Anfrage



Schema des Kernaufbaus:




Bild links:
Matratzenbezug Semy Plus
mit 3-seitigem, verdecktem
Reißverschluss (überlappend)
und Eckgummis

Eigenschaften des Matratzenbezuges



Menschen retten in Klinik-/ Pflegebetten

Rettungs-Zubehör Rhomb-Care® Semy Plus Evakuierungsbezug

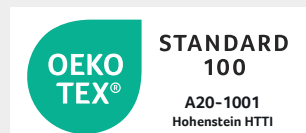

Mit dem Rhomb-Care® Evakuierungsbezug können bereits vorhandene Matratzen auf einfache Weise zur Rettungsmatratzen nachgerüstet werden. Im Evakuierungsfall ermöglicht der Bezug eine schnellstmögliche Rettung von immobilen Menschen aus dem Gefahrenbereich nur durch einen Helfer. Damit entfällt das aufwendige Umlagern auf Tragen oder Tragetücher.

Die blaue Oberseite des Bezuges ist aus PU-beschichtetem, atmungsaktivem Material gefertigt. Die schwarze Unterseite besteht aus strapazierfähigem und gleitfähigem Polyester-gewebe. Längsseitlich ist der Bezug mit Gurten versehen, die im Ernstfall zur Fixierung des Patienten / Bewohners mit Hilfe von Klettverschlüssen dienen. Am Kopf- und Fußende befinden sich Griff- bzw. Transportschlaufen. Alle Gurte und Schlaufen sind während des Nichtgebrauchs mit Klettverschlüssen enganliegend am Bezug gesichert.


Größe in cm	Art.Nr.	Größe in cm	Art.Nr.
90 x 200 x 14	57.048	100 x 200 x 14	57.051
90 x 200 x 15	57.248	100 x 200 x 15	57.251




1. Die Arme des Bewohners / Patienten unter die Bettdecke platzieren. Anschließend den Bewohner/Patienten mit den seitlichen Sicherungsgurten mit Hilfe der Klettverschlüsse auf der Matratzen fixieren.



2. Matratze an der Zugschleife am Fußende aus dem Bett ziehen. Um Panik zu vermeiden, bitte unbedingt Blickkontakt zum Bewohner / Patienten halten und die Vorgehensweise klar und deutlich erläutern. Alternativ kann auch die Zugschleife am Kopfende verwendet werden. Dies ist besonders bei Bewohnern / Patienten mit Kopf- oder Nackenproblemen empfehlenswert.

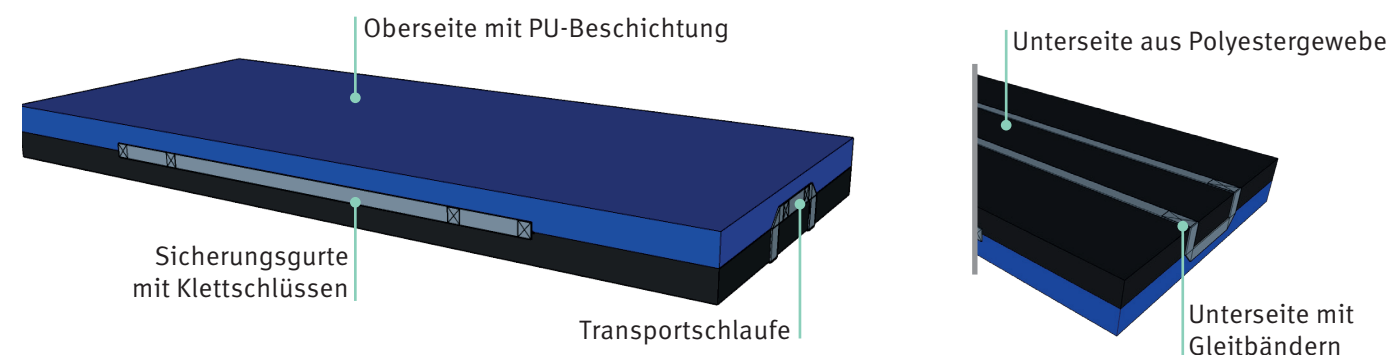


Eigenschaften des Matratzenbezuges

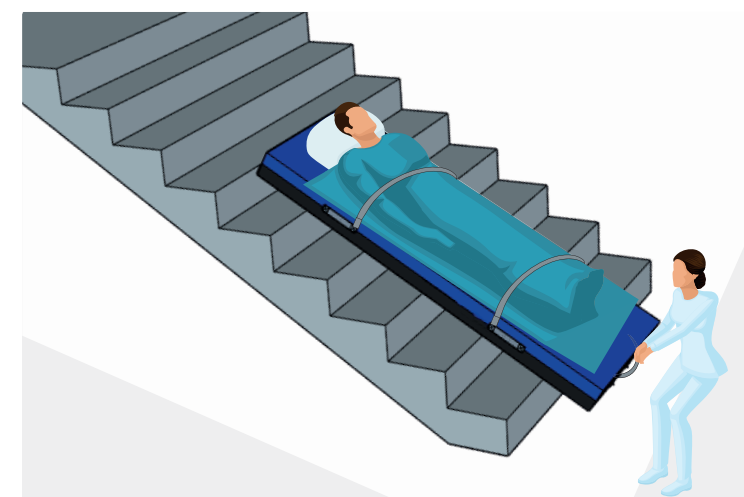

3. Bewohner / Patienten zügig über Flure und Treppen evakuieren und aus dem Gefahrenbereich bringen. Die Evakuierung kann alleine oder zu zweit erfolgen.

Übersicht Rhomb-Care® Hygienebezüge

Ideal im
Pflegealltag

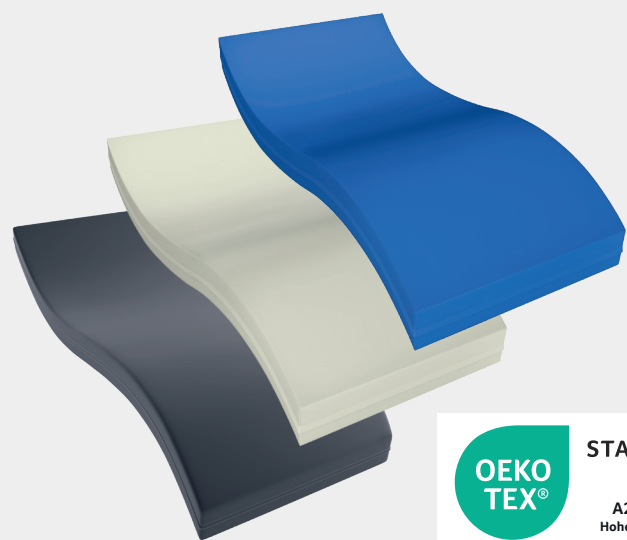


Die hochwertigen Rhomb-Care® PU-Hygienebezüge sind in verschiedenen Größen, Höhen und Ausführungen erhältlich.

Die mikrofeine, atmungsaktive Beschichtung garantiert ein angenehmes Mikroklima und einen hohen Liegekomfort.

Sie sind perfekt auf die hohen hygienischen Anforderungen in der Pflege abgestimmt. Alle Bezüge sind kochwaschbar, wasserdicht sowie viren- & bakteriendicht. Für hohe Sicherheitsansprüche innerhalb von Institutionen sind alle Bezüge schwerentflammbar.

Für leichtes Einziehen der Matratzenkerne nach der Wäsche sind Rhomb-Care® Hygienebezüge mit einem 3-seitigem Reißverschluss gearbeitet.

Eigenschaften des Matratzenbezuges

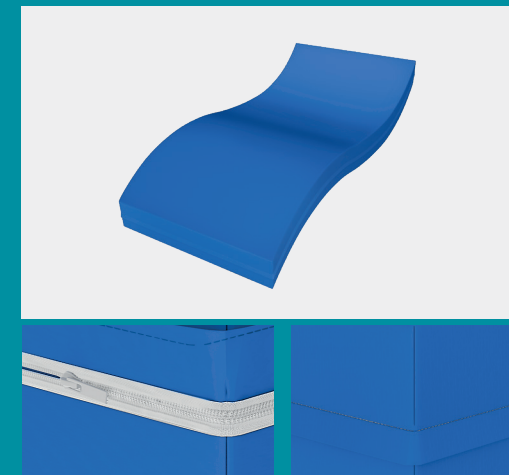


Matratzenbezug Semy Plus

- 3-seitiger Reißverschluss für leichtes Einziehen
- zusätzlich mit Reißverschlussüberlappung
- Flächengewicht: 195 g/m²
- hochelastisch
- idealer Bezug für Weichlagerungsmatratzen
- auch mit Evakuierungsaussattung erhältlich

Größe in cm	Art.Nr.	Größe in cm	Art.Nr.
90 x 200 x 7	57.348	100 x 200 x 7	57.351
90 x 200 x 12	57.548	100 x 200 x 12	57.551
90 x 200 x 14	57.648	100 x 200 x 14	57.651
90 x 200 x 15	57.748	100 x 200 x 15	57.751

Sondergrößen auf Anfrage

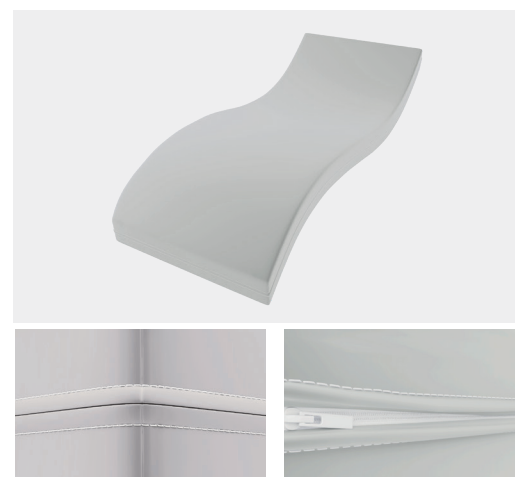


Matratzenbezug Semy

- 3-seitiger Reißverschluss für leichtes Einziehen
- Flächengewicht: 180 g/m²
- elastisch

Größe in cm	Art.Nr.	Größe in cm	Art.Nr.
90 x 200 x 12	59.348	100 x 200 x 12	59.351
90 x 200 x 14	59.548	100 x 200 x 14	59.551
90 x 200 x 15	59.948	100 x 200 x 15	59.951

Sondergrößen auf Anfrage

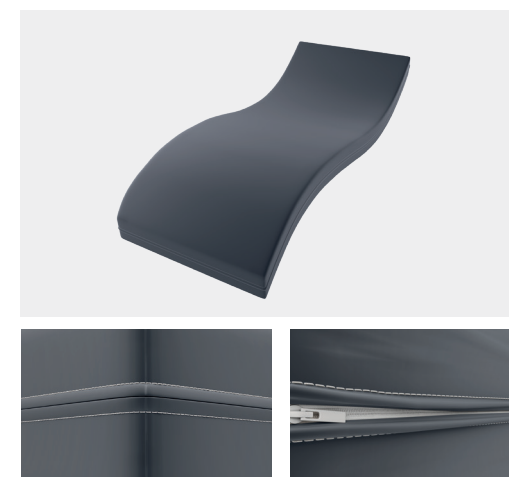

Matratzenbezug Semy light

- 3-seitiger Reißverschluss für leichtes Einziehen
- Flächengewicht: 120 g/m²
- elastisch

Größe in cm	Art.Nr.	Größe in cm	Art.Nr.
90 x 200 x 14	54.548	120 x 200 x 14	54.552
100 x 200 x 14	54.551	140 x 200 x 14	54.564

Sondergrößen auf Anfrage

Ausblick: Weitere Sortimente Positionierungskissen

RHOMBO-MEDICAL® bietet professionelle
Produkte zur Dekubitusintervention

**R H O M B O
M E D I C A L**

Die Ruhe, die beweglich hält.®

Ideal im
Pflegealltag

Dekubitusintervention
Dekubitusprophylaxe
Dekubitustherapie



Gut gefüllt. Gut gefühlt.

RHOMBO-MEDICAL® bietet professionelle Positionierungskissen bzw. Lagerungskissen für den medizinischen und therapeutischen Bereich, die in Krankenhäusern, Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen, Altenpflegeheimen und sonstigen therapeutischen Einrichtungen zum Einsatz kommen.

RHOMBO-MEDICAL® bietet zahlreiche Produkte zur professionellen Dekubitusintervention. Sie werden zur Entlastung und Stabilisierung von Patienten und Bewohnern zum komfortablen Liegen, Lagern, Schlafen und Sitzen verwendet mit dem Ziel der Dekubitusprophylaxe und Dekubitustherapie.

Das Geheimnis der einzigartigen Funktionalität der RHOMBO-MEDICAL® Kissen steckt in den patentierten Füllmaterialien Rhombo-fill® und Rhombo-med®. Sie sind der Garant für Langlebigkeit und ein einzigartiges Komforterlebnis.






Rhombo-fill®

Soft und elastisch.
Luftzellenstäbchen mit dem Rhombenschnitt.

Rhombo-med®

Anschmiegsam und stützend.
Luftzellenstäbchen mit Polsterperlen.

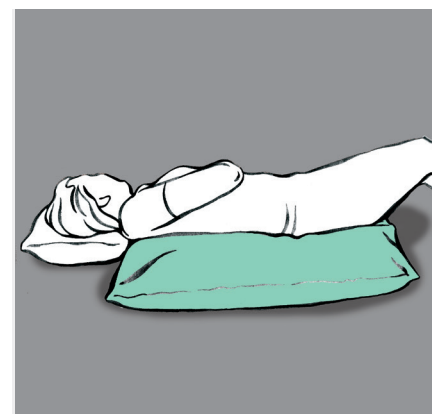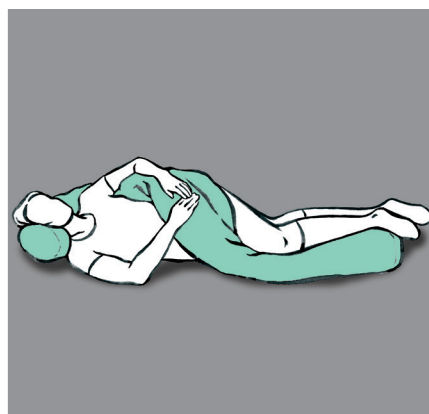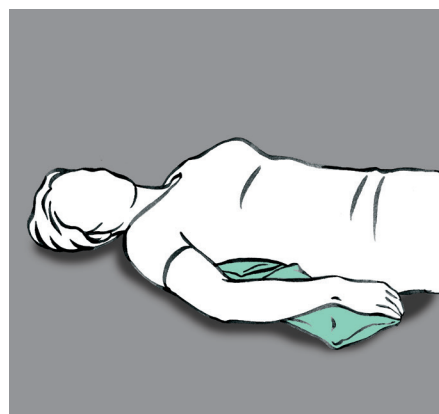

Mehr erfahren unter:
www.rhombo-medical.de



Die Ruhe, die beweglich hält.®



Lück GmbH & Co.KG · 46395 Bocholt
Tel. +49 (0)2871 / 99 79-0 · Fax +49 (0)2871 / 99 79-10
www.rhombo-medical.de · info@rhombomedical.de