


## ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE *Rhombo-Care® Therm Plus*

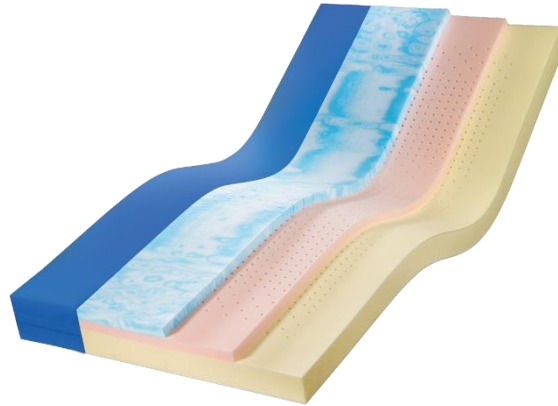

Die *Rhombo-Care® Therm Plus* besitzt einen dreischichtig progressiven Aufbau - von sehr weich, über mittelfest bis fest. Das Rhombo-Therm® (Skytherm) leitet weich zur nächsten etwas festeren Matratzenmitte über bis zur Matratzenbasis, die die höchste Materialfestigkeit aufweist. Der festere Seitenrand erleichtert das Aufstehen aus der sitzenden Position vom Bettrand.

### Matratzenkonstruktion:

Material:	Hochwertiger Kaltschaum
Matratzenbasis:	8 cm Rhombo-Flex Kaltschaum mit vertikaler Belüftung, RG 55
Liegefläche:	3 cm 7-Zonen Rhombo-Flex Kaltschaum, vertikale Belüftung, RG 55 mit Randzonenverstärkung
	3 cm spezieller <i>Rhombo-Therm®</i> -Auflage „Skytherm“
Bezüge:	Kombinieren Sie die Matratze <i>Rhombo-Care® Therm Plus</i> mit drei verschiedenen Matratzenbezügen
Format:	90x200x14 cm (weiter Größen auf Anfrage)


### Eigenschaften:

Die Oberseite aus „Skytherm“ sorgt für hohe Punktelastizität sowie eine sehr gute Druckverteilung und nimmt die Körperkontur sehr weich auf. Insbesondere schwere bzw. ausgeprägte Körperpartien wie die Schulter (in Seitenlage) und das Gesäß tauchen in das Material ein, werden druckverteilend aufgenommen und optimal belüftet - für ein gesundes, trockenes Schlafklima.

### Einsatzbereich:

**Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei allen Dekubitustherapien (Stadium I bis IV) ihren Beitrag. Durch den progressiven Aufbau unterstützt die Matratze bis zu einem Körpergewicht von 140 kg. (empfohlen bis BMI 44)**

## ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE *Rhomb-Care® Therm Plus*

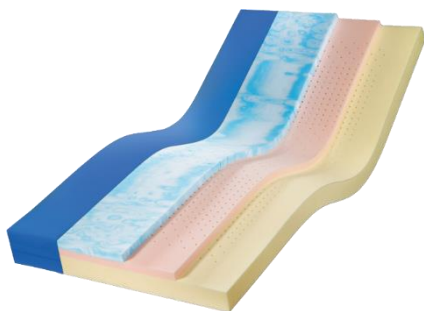


### RC® Therm Plus mit Semy-Plus Bezug

Farbe: blau

Rundum:

polyurethan-kaschiertes PES-Textil  
längs- und querelastisch  
wasserdicht, bakteriendicht  
schwer entflammbar

waschbar bis 95°C

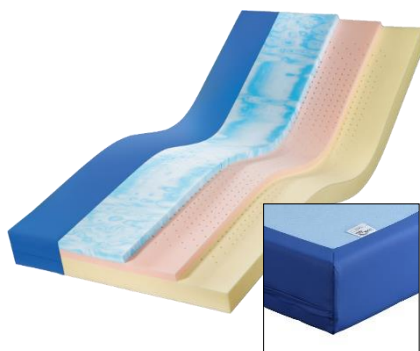

### RC® Therm Plus mit Klintex Bezug

Farbe: hellblau/blau

Oberseite und seitlich:

polyurethan-kaschiertes PES-Textil  
längs- und querelastisch  
wasserdicht, bakteriendicht  
schwer entflammbar

Unterseite:

100% Feinjersey mit Tragegriffen

waschbar bis 95°C



### RC® Therm Plus mit Semy-Plus EVA Bezug

Farbe: blau/schwarz

Oberseite und seitlich:

polyurethan-kaschiertes PES-Textil  
längs- und querelastisch  
wasserdicht, bakteriendicht  
schwer entflammbar

Unterseite:

100% Polyester  
Gurtbänder mit Klettverschluss  
Griffschlaufen zur Evakuierung

waschbar bis 95°C