

Der spezielle

Rhombophil®

Ohrfreilagerungsring

- Zur Freilagerung des Ohres in Seitenlage
- Einseitig begradigt zur optimalen Anpassung die Nacken-Schulterpartie



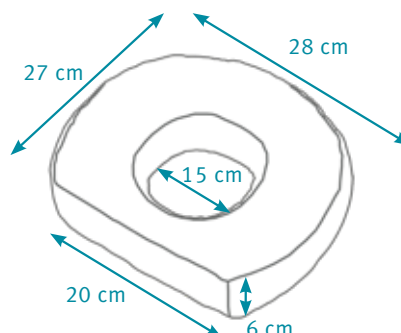
Dieser Rhombophil® Lagerungsring wurde speziell zur Druckentlastung der Ohrmuschel in Seitenlage entwickelt. Die Öffnung des Rhombophil® Ohrfreilagerungsringes ist mit 15 cm Innendurchmesser besonders groß gearbeitet, so dass die komplette Ohrmuschel freigelagert werden kann. Das weiche Material schmiegt sich perfekt an das Seitenprofil von Kopf und Hals an. Der Lagerungsring ist einseitig begradigt zur optimalen Anpassung an die Schulterpartie. Der Rhombophil® Lagerungsring ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele



Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte mit Seitenboden, einseitig begradigt		
Füllung	Original Rhombo-fill®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
außen: Ø 30 innen: Ø 15	32.688	51.688	59.688	50.688	



STANDARD 100
A20-1001
Hohenstein

Der stabilisierende Rhombomed® HWS-Zervikal-Ring

- Zur Ruhigstellung von Kopf und Nacken
- Zur Freilagerung von Kopf und Nacken
- Stabilisierung und Unterstützung der Halswirbelsäule

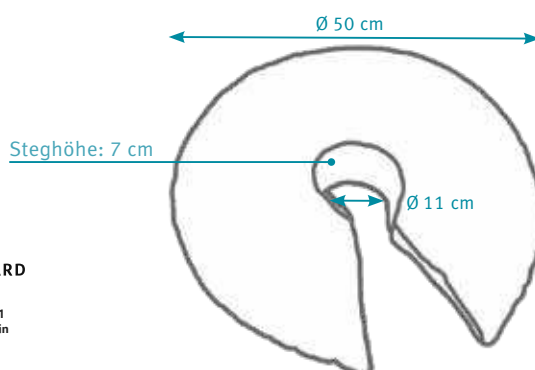


Der Rhombomed® HWS-Zervikal-Ring dient zur weitreichenden Ruhigstellung des Kopfes und des Nackenbereichs in Rücken- und Seitenlage. Das Füllmaterial Rhombomed® stabilisiert sanft und druckentlastend die Position von Kopf und Nacken. Die Mitte des Rhombomed® HWS-Zervikal-Ring ist mit Innensteg gefertigt und schafft das notwendige Volumen für die optimale Unterstützung. Der Rhombomed® HWS-Zervikal-Ring ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele


Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte Seitenboden innen		
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm		Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>	
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
außen: Ø 50 innen: Ø 11		41.387	51.087	59.087	50.087


STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein

Das variable

Rhombo-med® Stufenbettkissen

- Zum druckentlastenden Hochlagern der Beine
z. B. bei Schwellungen
- Zur Entlastung von Bauch und Rücken
- Variabel an verschiedene Beinlängen anpassbar
- Schmiegt sich angenehm an Beinform an



Das Rhombo-med® Stufenbettkissen dient zum komfortablen Hochlagern der Beine in der Stufenbettlage. Die Wirbelsäule wird entlastet, die Bandscheiben können sich optimal regenerieren. Diese Liegeposition fördert auch den venösen Blutfluss bei geschwollenen Beinen und kann ebenso entlastend bei Bauchschmerzen wirken. Durch einfaches Drehen kann das Kissen an unterschiedliche Beinlängen angepasst werden.

ANWENDUNGEN

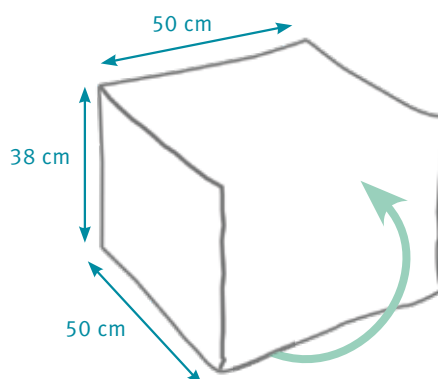
Beispiele



Bezug	100 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte Würfel mit zwei verschiedenen Seitenlängen
Füllung	Original Rhombo-med®		
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Für dieses Kissen sind keine Schutzbezüge lieferbar.	

50 x 50 x 38

43.424


STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein

Das durch Eigengewicht gesicherte

Rhombo-med®

Rückenkissen mit Fahne

- Positionierung in 30°-Lage
- Stabilisierende Positionierung



Das Rhombo-med® Rückenstützkissen mit Fahne wurde speziell zur stabilisierenden Positionierung in 30°-Lage entwickelt. Der zu pflegende Mensch liegt dabei auf der Kissenfahne und sichert mit seinem eigenen Körpergewicht das Kissen vor dem Verrutschen. Das Rhombo-med® Rückenstützkissen mit Fahne ist kochwaschbar.

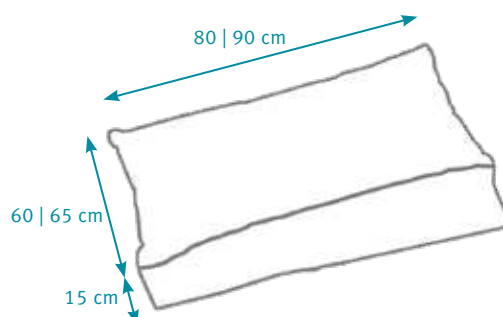
ANWENDUNGEN

Beispiele


Detail: Fahne

Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	Sicherheitsnähte mit Fahne
Füllung	Original Rhombo-med®			
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Hilfsmittelnr.	Konstruktionsbedingt ist für dieses Kissen kein Schutzbezug lieferbar.	

80 x 60	41.934	11.11.05.1007	-	-	-
90 x 65	41.937	11.11.05.1007	-	-	-


**STANDARD
100**
A20-1001
Hohenstein


Der tragfähige Rhombo-fill® Sitzring

- Weich- bzw. lokale Freilagerung
- Druckentlastung im Gesäßbereich
- in zwei Varianten erhältlich



Der Rhombo-fill® Sitzring dient zur lokalen Druckentlastung im Gesäßbereich. Der Sitzring wird, abhängig vom Körpergewicht des Anwenders, in zwei Volumengrößen angeboten. Die Konstruktion unterscheidet sich dahingehend, dass bei einem Körpergewicht ab 60 kg der Sitzring mit Seitenböden innen und außen gefertigt ist. Der Sitzring für Anwender unter 60 kg ist nur mit einem dezenten inneren Seitenboden versehen. Dieser Sitzring ist insgesamt weniger hoch. Beide Varianten des Rhombo-fill® Sitzrings sind kochwaschbar.

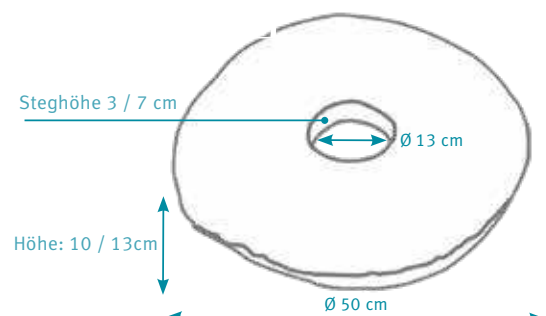
ANWENDUNGEN

Beispiele



Sitzring bis 60 kg mit Innensteg von nur 3 cm Höhe und ohne Seitenboden

Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte nur Seitenböden innen bis 60 kg Seitenböden innen + außen ab 60 kg		
Füllung	Original Rhombo-fill®				
Größe in cm		Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
ab 60 kg außen: Ø 50 innen: Ø 13 cm Höhe: 13 cm		31.188	51.188	59.188	50.188
bis 60 kg außen: Ø 50 innen: Ø 13 Höhe: 10 cm		31.088	51.088	59.088	50.088



STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein

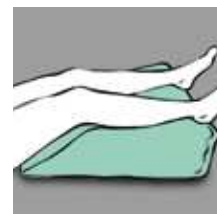
Das entlastende Rhombomed® Venenkissen

- Optimale Beinhochlagerung
- Entlastung der Wirbelsäule
- Entspannung
- Schmiegt sich angenehm an Beinform an



Das keilförmige Rhombomed® Venenkissen unterstützt die therapeutische Hochlagerung der Beine bei venös bedingten Beschwerden und kann ebenso zur Entlastung der Wirbelsäule eingesetzt werden. Der Schaumkern des Venenkissens ist für die Beinauflage vorgeformt und sanft ansteigend. Der Clou: Die Auflagefläche der Beine ist auf der Innenseiten des Kissenbezuges mit Rhombomed® Füllung gepolstert, so dass sich das Kissen lückenlos an jede Beinform anpasst, für optimale Druckverteilung sorgt und den venösen Blutfluss sehr gut unterstützt. Der Kissenbezug ist abnehmbar und kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

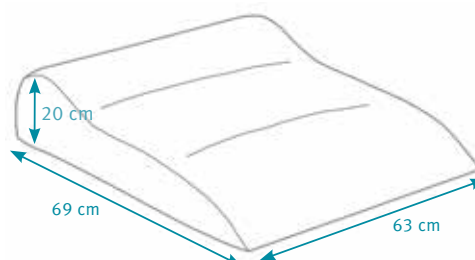
Beispiele


Bezug	100 % Polyester - Velours	Verarbeitung	Schaumkern der mit Rhombomed® Polsterung im Bezug versehen ist
Füllung	Original Rhombomed®		

Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
69 x 63 x 20	44.140	--	59.050	50.050



STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein



Die unterstützende Rhombomed® runde Rolle

■ Zur stützenden und stabilisierenden Lagerung einzelner Körperpartien



HYGIENE PLUS+ 95

Die Rhombomed® runde Rolle dient zur stützenden und stabilisierenden Lagerung einzelner Körperpartien. Insbesondere in der Rückenlage kann die runde Rolle unter die Knie positioniert werden, um die Wirbelsäule zu entlasten und ein Hohlkreuz zu vermeiden. Die Rhombomed® runde Rolle ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

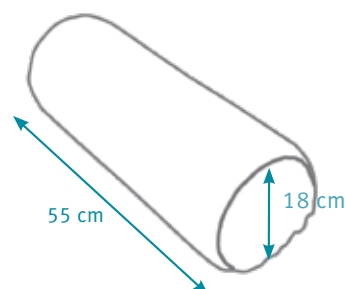
Beispiele



Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte runde Seitenböden		
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Reißverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
Ø 18 x 55	42.983	51.183	59.183	50.183	



STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein

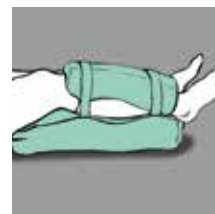


Unterschenkelmanschette

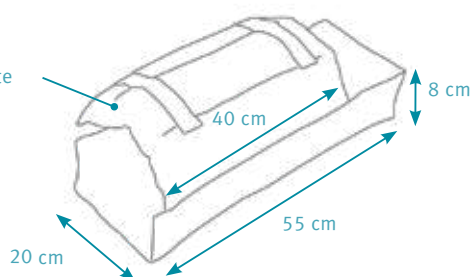


Die Unterschenkel-Manschette dient zur Freilagerung der Ferse. Die weich gepolsterte Befestigungsmanschette umschließt sanft das Schienenbein. Der Unterschenkel wird druckentlastend positioniert und sicher mit Hilfe von Klettverschlüssen fixiert, so dass die Ferse angenehm freigelagert ist. Die Rhombo-med® Unterschenkel-Manschette ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele


Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte Manschette mit Klettverschlüssen
Füllung	Original Rhombo-med®		
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	<i>Konstruktionsbedingt ist für dieses Kissen kein Schutzbezug lieferbar.</i>	
55 x 20 x 8	30.328		

Weite der Manschette
30 cm


Ø 40 cm


STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein

Das

komfortable

Rhombo-med®

Entspannungskissen

- Sehr gute Körperanpassung
- Kann das Wohlbefinden fördern
- Unterstützung der Wahrnehmung

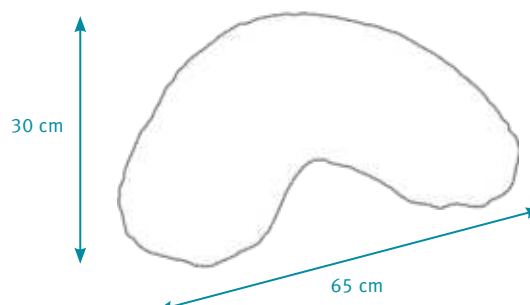


Das Rhombo-med® Entspannungskissen kann durch seine gekrümmte Form sehr flexibel an unterschiedlichen Positionen des Körpers eingesetzt werden. Insbesondere unter den Arm gelegt, kann es Geborgenheit vermitteln. Doch das Kissen kann durch seine Form auch zwischen den Knien positioniert werden oder im Rücken platziert werden, um die nötige Unterstützung zu gewährleisten. Das Rhombo-med® Entspannungskissen ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele


Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester		Verarbeitung	Sicherheitsnähte bogenförmig	
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen		Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>		
			Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®
30 x 65	46.700		51.701	59.701	50.701


STANDARD
100
A20-1001
Hohenstein

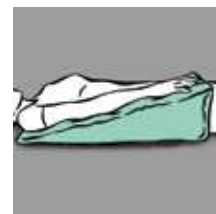
Die unterstützende Rhombomed® Armrampe

- Hochlagerung des Arms
- Ruhigstellung des Arms



Die Rhombomed® Armrampe dient zur ruhigstellenden Positionierung des gesamten Armes in der großen Ausführung oder des Unterarmes in der kleineren Variante. Das Füllmaterial Rhombomed® sorgt dabei für die notwendige Stabilisierung bei gleichzeitiger Druckentlastung. Die Rhombomed® Armrampe ist kochwaschbar.

ANWENDUNGEN

Beispiele


Bezug	Robuster Oberstoff in Körperbindung 50 % Baumwolle und 50 % Polyester	Verarbeitung	Sicherheitsnähte mit keilförmigem Seitenböden		
Füllung	Original Rhombo-med®				
Größe in cm	Art.Nr. Kissen	Passende Schutzbezüge zum Kissen inkl. Hotelverschluss <i>*Detailbeschreibungen siehe Seite 54</i>			
		Schutzbezug Baumwolle	PU-Schutzbezug Semy	Schutzbezug Climate Soft®	
35 x 20 x 12	40.707	51.007	59.007	50.007	
80 x 25 x 25	40.744	51.044	59.044	50.044	



**STANDARD
100**
A20-1001
Hohenstein

