


HYGIENEBEZUG Klintex

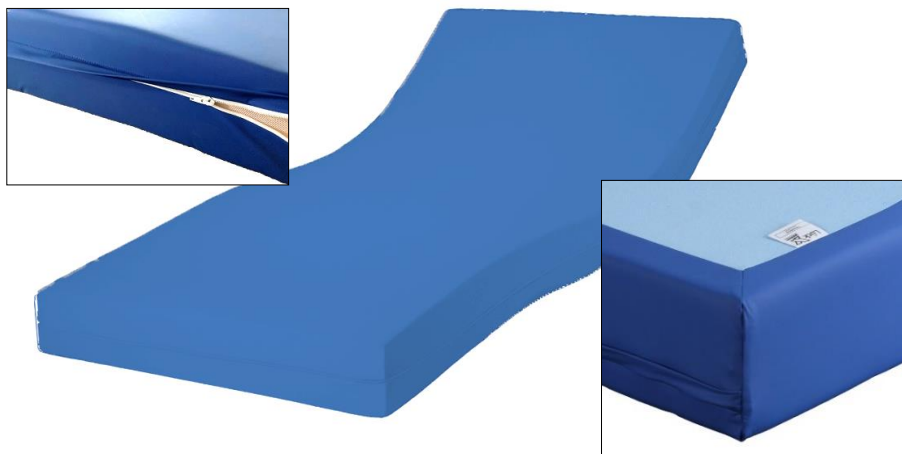

Der Hygienebezug **Klintex** verbindet die Vorteile eines Hygienebezuges mit denen eines Jerseybezuges. Auf der Oberseite, seitlich und 7 cm an der Unterseite überlappend (siehe kleines Bild oben rechts), besteht der **Klintex** Hygienebezug aus einem polyurethan-kaschiertem bi-elastischen und schwerentflammaren PES-Textil in den Farben blau oder grau (je nach Matratzentyp). Die Unterseite besteht aus einem hellblauen, 100 % Feinjersey. Die mikrofeine atmungsaktive Beschichtung des Hygienematerials garantiert ein angenehmes Schlafklima und einen hohen Liegekomfort. Die Unterseite aus Jersey sorgt für den optimalen Feuchtigkeitsaustausch nach unten. Verdeckter Reißverschluss an 3 Seiten für leichtes Einziehen

- Hygienematerial schwer entflammbar - BS 7175 (1989)
- kochfest 95°C, tumblerfest 100°C
- chemisch reinigungsbeständig
- dampfsterilisierbar
- Oberseite beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel.

Technische Daten Hygienematerial:

• Gewicht	ISO 3801/5 1977	ca. 195 g/m ²
• Höchstzugkraft Kette	ISO 13934 1999	> 240 N/5 cm
• Höchstzugkraft Schuss	ISO 13934 1999	> 200 N/5 cm
• Weiterreissfestigkeit Kette	ISO 4874A1 1977	> 35 N
• Weiterreissfestigkeit Schuss	ISO 4874A1 1977	> 30 N
• Wasserdichtheit vor waschen	ISO 811 1981	ca. 2000 mm
• Wasserdichtheit nach waschen	ISO 811 1981	ca. 2000 mm
• Wasserdampfdurchlässigkeit		ca. 600 g/m ² d
• Bakteriendicht	ATCC 6538	OK
• Schimmelbeständig	ATCC 9642	OK

Entsorgung: unbedenklich mit normalem Hausmüll